



Inspired by temperature

Betriebsanleitung · Operation manual · Manual de instrucciones · Manuel d'utilisation · Manuale de d'uso · 사용 설명서 · Manual de instruções · Инструкция по эксплуатации · Kullanım talimatı · 操作说明书

Minichiller® MPC®

Betriebsanle
instruccion
· 사용 설명
по эксплуа

Betriebsan
instruccion

· 사용 설명서 · Manual de instruções · Инструкция по эксплуатации · Kullanım talimatı · 操作说明书

본 문서는 장치에 대한 특정한 기술을
다른 부록을 포함하고 있지 않습니다.

info@huber-online.com 에서 사용설명서 전체를 요청할 수 있습니다. 귀하 이메일에 있는 온도 제어 장치의 모델 이름과 일련 번호를 적어주시길 바랍니다.

huber



사용 설명서

Minichiller[®] MPC[®]

Minichiller®

MPC®

이 사용 설명서는 원본 사용 설명서에서 번역되었습니다.
가열기가 있는 모델에도 해당.

관련:

DESKTOP

Minichiller® 280

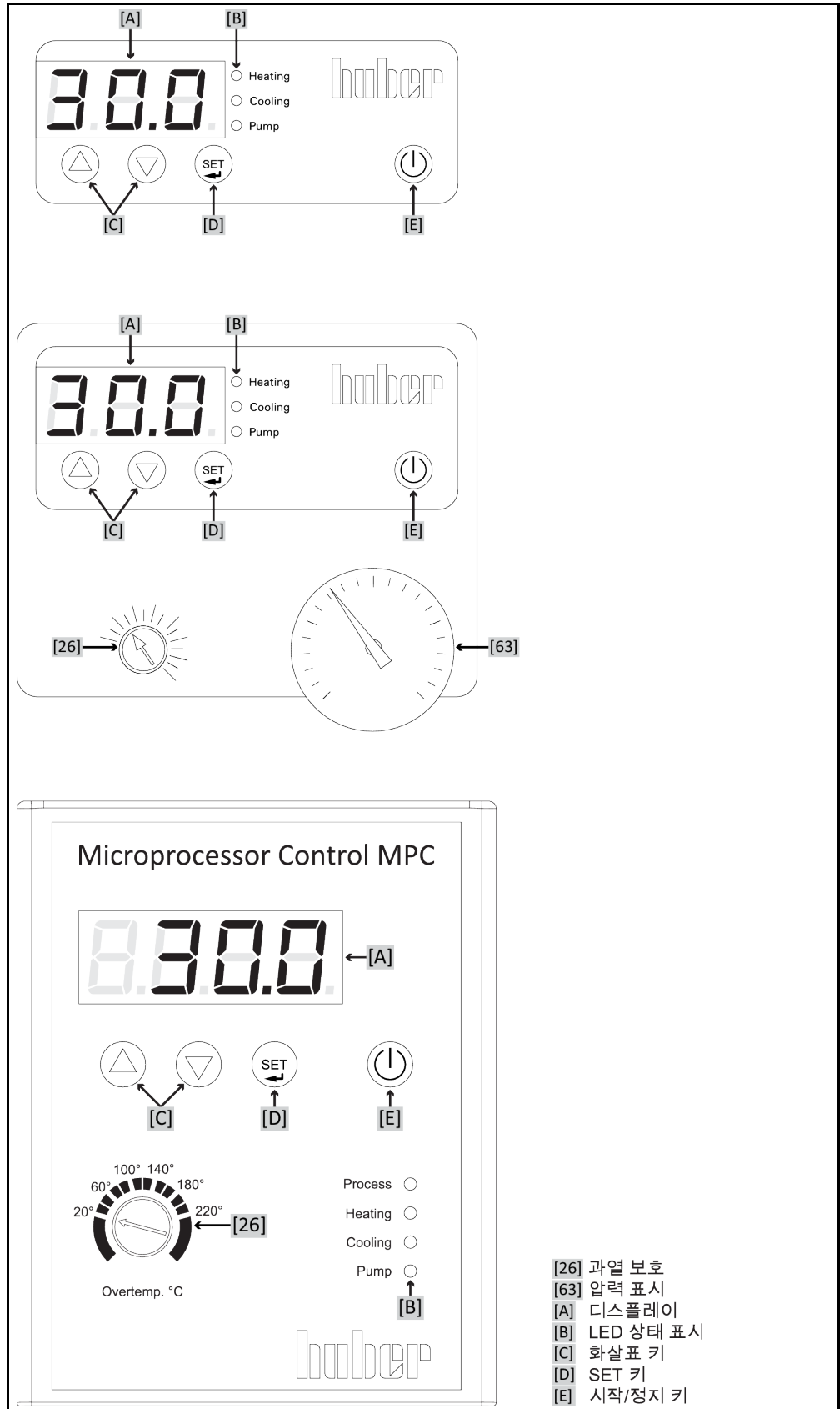
Minichiller® 300

Minichiller® 600

모델 명칭 약자:

ohne = 공랭, w = 수랭, plus = RS232 인터페이스

MPC 제어 장치 버전.
Minichiller/Unichiller,
Unichiller, MPC
행거(위에서 아래로)



목차

V2.5.0ko/05.04.24//1.30

1	소개	12
1.1	사용 설명서의 마킹/기호	12
1.2	EU 적합성 선언에 관한 정보	12
1.3	안전	12
1.3.1	안전 수칙의 설명	12
1.3.2	온도 조절 장치의 표지 표시	13
1.3.3	규정에 맞는 작동	14
1.3.4	예측 가능한 오용	14
1.4	관리자와 작업 인력-의무와 필요 조건	14
1.4.1	관리자의 의무	14
1.4.1.1	도구와 소모품의 전문적 폐기	15
1.4.1.2	냉매가 있는 온도 조절 장치	15
1.4.1.3	불화계 온실 가스/냉매를 갖춘 온도 조절 장치	18
1.4.2	작업 인력에 대한 요구 사항	18
1.4.3	작업 인력의 의무	18
1.5	일반적인 정보	18
1.5.1	작업장 설명	18
1.5.2	독일 산업 표준(DIN) 12876 에 따른 안전 장치	19
1.5.2.1	기계 과열 보호	19
1.5.2.2	낮은 수준 보호	19
1.5.3	추가적인 보호 장치	19
1.5.3.1	전원 차단	20
1.6	냉각 버전 도시	20
1.6.1	에너지 배출이 불충분한 경우의 영향	21
2	시동	22
2.1	시설 내의 운반	22
2.1.1	온도 조절 장치의 리프팅과 운반	22
2.1.1.1	운반 러그 없는 온도 조절 장치	22
2.1.2	온도 조절 장치의 배치	22
2.1.2.1	롤러를 갖춘 온도 조절 장치	22
2.1.2.2	롤러가 장착되지 않은 온도 조절 장치	23
2.2	언패킹	23
2.3	환경 조건	23
2.3.1	EMC 구체 정보	25
2.4	설치 조건	25
2.5	권장되는 온도 조절 및 냉각수 호스	26
2.6	렌치 크기 및 토크	26
2.7	수랭을 갖춘 온도 조절 장치	27
2.8	작동 준비	29
2.8.1	받침대(있다면) 제거/활성화	29
2.8.2	무소음 작동(옵션) 활성화/비활성화	29
2.8.3	수집 용기 설치	29
2.8.4	기능성 접지 연결	30
2.9	외부 폐쇄형 애플리케이션에 연결하기	30
2.9.1	외부 폐쇄형 애플리케이션 연결	30

2.10	전원 연결	30
2.10.1	보호 접촉 기능을 가진 접지 소켓을 통한 연결(PE).....	31
2.10.2	배선 연결.....	31
3	기능 설명	32
3.1	온도 조절 장치의 기능 설명	32
3.1.1	일반적인 기능.....	32
3.1.2	다른 기능.....	32
3.2	열 유체에 관한 정보	32
3.3	테스트 계획 주의 사항	33
3.4	디스플레이 및 조절 장비	34
3.4.1	디스플레이.....	34
3.4.2	LED 디스플레이 상태.....	34
3.4.3	화살표 키.....	34
3.4.4	세트 키.....	34
3.4.5	시작/중단 키.....	34
3.5	메뉴 기능	35
3.6	기능 예시	35
3.6.1	설정값 표시.....	35
3.6.2	설정값 조정.....	35
3.6.3	자동-시작 기능 변경.....	35
4	설정 모드	37
4.1	설정 모드	37
4.1.1	온도 조절 장치 켜기.....	37
4.1.2	온도 조절 장치 끄기.....	37
4.1.3	과열 보호(ÜT) 켜기.....	37
4.1.3.1	과열 보호에 관한 일반 정보.....	37
4.1.3.2	과열 보호 설정.....	38
4.1.4	과열 보호의 기능 테스트.....	38
4.2	충전, 환기 그리고 배출	39
4.2.1	외부에서 닫히는 장치 충전과 환기.....	39
4.2.2	외부에서 닫히는 장치 비우기.....	41
4.2.2.1	열 유체 회로 비우기.....	41
4.2.2.2	애플리케이션 분리/장착.....	41
4.2.2.3	밸브 닫기.....	41
5	일반적인 작동	42
5.1	자동 모드	42
5.1.1	온도 조절.....	42
5.1.1.1	온도 조절 시작.....	42
5.1.1.2	온도 조절 종료.....	42
6	인터페이스	43
7	정비/유지 보수	44
7.1	오류 시 디스플레이	44
7.2	정비	45
7.2.1	기능과 시각적인 조사 간격.....	45
7.2.2	온도 조절이나 냉각수 호스 교체.....	46
7.2.2.1	온도 조절 호스 교체.....	46
7.2.2.2	냉각수 호스 교체.....	46
7.2.3	콘덴서 핀 청소.....	46

7.2.4	필터 스크린/스트레이너 청소.....	47
7.2.4.1	냉각수 회로 비우기.....	48
7.2.4.2	냉각수 공급 장치 분리.....	48
7.2.4.3	필터 스크린/스트레이너 청소.....	48
7.2.4.4	냉각수 공급 장치 장착.....	48
7.3	열 유체 – 확인, 변경 그리고 순환 청소.....	48
7.3.1	열 유체 변경.....	49
7.3.1.1	외부에서 닫히는 장치.....	49
7.3.2	열 유체 회로 씻기.....	49
7.4	표면 청소.....	50
7.5	메커니컬 씰 확인.....	51
7.6	플러그 접점.....	51
7.7	오염 제거/수리.....	51
8	가동 중단.....	52
8.1	안전 수칙과 원칙.....	52
8.2	비활성화.....	52
8.3	온도 조절 장치 비우기.....	53
8.4	냉각수 배출.....	53
8.4.1	배출 과정.....	53
8.5	수집 용기 설치.....	53
8.6	외부 애플리케이션 설치 해제.....	53
8.7	널 스크루 장착.....	54
8.8	받침대(있는 경우) 조이기/비활성화.....	54
8.9	포장.....	54
8.10	운반.....	54
8.11	폐기.....	55
8.12	연락 정보.....	55
8.12.1	전화번호: 고객 지원.....	55
8.12.2	전화번호: 판매.....	56
8.12.3	이메일 주소: 고객 지원.....	56
8.13	통관 증명서.....	56
9	부록.....	57

서문

고객님,

Peter Huber Kältemaschinenbau SE 의 온도 조절 장치를 선택하셨습니다. 훌륭한 선택을 하신 것입니다. 신뢰해 주셔서 감사합니다.

제품을 시동하기 전에, 이 사용 설명서를 잘 읽으시길 바랍니다. 모든 지침 및 안전 수칙을 반드시 준수하십시오.

운송, 시동, 작업, 정비, 수리, 보관 및 폐기 시에 이 사용 설명서에 따라 진행하십시오.

규정에 맞게 올바르게 사용할 경우 당사에서는 온도 조절 장치에 대한 전적인 품질 보증을 제공합니다.

이 사용 설명서에서는 5 페이지에 제시된 모델을 온도 조절 장치라고 하고 Peter Huber Kältemaschinenbau SE 회사를 Huber 사 또는 Huber 라고 합니다.

내용 오류 및 인쇄 오류에 대한 책임은 지지 않습니다.

독일 및/또는 전 세계 다른 국가들에서 Peter Huber Kältemaschinenbau SE 의 상표로 등록되어 있는 브랜드들과 Huber 로고: BFT®, CC®, Chili®, Com.G@te®, Compatible Control®, CoolNet®, DC®, E-grade®, Grande Fleur®, Huber Piccolo®, KISS®, Minichiller®, Ministat®, MP®, MPC®, Peter Huber Minichiller®, Petite Fleur®, Pilot ONE®, RotaCool®, Rotostat®, SpyControl®, SpyLight®, Tango®, TC®, UC®, Unical®, Unichiller®, Unimotive®, Unipump®, Unistat®, Unistat Tango®, Variostat®. 독일에 등록된 DWS-Synthesetechnik 의 상표: DW-Therm®, DW-Therm HT®. BASF SE 의 등록 상표: Glysantin®.

1 소개

1.1 사용 설명서의 마킹/기호

다음 마킹 및 기호가 텍스트 및 그림에서 사용됩니다.

개요	마킹/기호	설명
	→	정보/진행 과정 참조.
	«텍스트»	사용 설명서의 한 장 참조. 디지털 버전에서는 텍스트를 클릭할 수 있습니다.
	<텍스트> [숫자]	부록의 결선도 참조. 명칭과 검색 번호가 지정되어 있습니다.
	<텍스트> [문자]	동일한 섹션의 도면을 참조합니다. 명칭과 검색 번호가 지정되어 있습니다.
	▪	목록, 1. 레벨
	–	목록, 2. 레벨

1.2 EU 적합성 선언에 관한 정보






CE 본 장치들은 다음과 같은 유럽 지침의 기본적인 안전과 건강 보호 필요 조건을 준수합니다:

- 기계 지침
- 저전압 지침
- EMC 지침


1.3 안전

1.3.1 안전 수칙의 설명

안전 수칙은 이하의 그림 문자/신호어 조합으로 표시되어 있습니다. 신호어는 설명서를 따르지 않았을 때의 잔여 위험의 유형을 나타냅니다.

 위험	사망 또는 중상을 입힐 수 있는 즉각적인 위험 상황을 표시합니다.
 경고	사망 또는 중상을 입힐 수 있는 일반적으로 위험한 상황을 표시합니다.
 주의	상해를 입힐 수 있는 위험한 상황을 표시합니다.
 알아두기	물적 손상을 초래할 수 있는 상황을 표시합니다.
 정보	중요한 정보와 유용한 팁을 표시합니다.

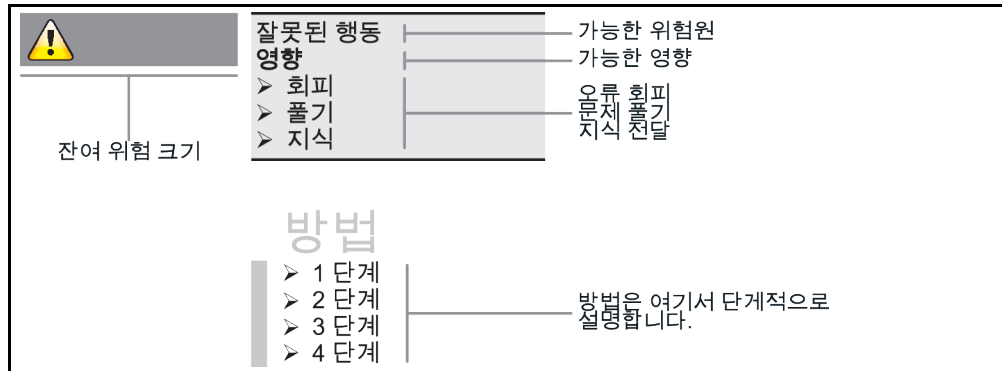안전 수칙과 방법
설명



본 사용 설명서의 안전 수칙의 목적은 관리자, 작업자, 설비를 피해로부터 보호하는 것입니다. 귀하는 개별적인 행동을 하기에 앞서, 먼저 올바르게 않은 작업으로 인한 잔여 위험에 대해 통지를 받아야 합니다.

1.3.2 온도 조절 장치의 표지 표시

다음 픽토그램은 안전 표지로 사용됩니다. 표를 통해 사용한 안전 표지의 개요를 볼 수 있습니다.

개요	표지	설명
명령		
		- 설명서 준수
경고 표지		
		- 일반 경고 표지 - 설명서 준수
		- 감전 경고
		- 뜨거운 표면 경고
		- 가연성 물질 경고
기타		
		전기 제품 폐기 시 국내 및 지역 규정을 준수하십시오. → 페이지 55, 섹션 «폐기»

1.3.3 규정에 맞는 작동



위험

온도 조절 장치가 폭발 위험 지역에서 작동되고 있습니다
폭발로 인한 사망

- 온도 조절 장치를 ATEX 구역 내에 세우거나 거기서 사용하지 마세요.



경고

규정에 맞지 않는 작동
중상 및 물적 손상

- 사용 설명서를 온도 조절 장치의 바로 가까이에서 쉽게 이용할 수 있도록 보관합니다.
- 충분한 자격을 갖춘 작업 인력만 온도 조절 장치를 다루어야 합니다.
- 작업 인력은 온도 조절 장치를 다루기 전에 훈련받아야 합니다.
- 작업 인력이 사용 설명서를 숙지하였는지 확인해야 합니다.
- 작업 인력에게 정확한 책임을 할당해야 합니다.
- 작업 인력은 개인 보호 장비를 제공받아야 합니다.
- 사망과 상해를 막고 피해를 일으키지 않도록 안전 규정을 따르는 것이 중요합니다!



알아두기

제 3 자에 의한 온도 조절 장치 변경

온도 조절 장치의 물적 손상

- 온도 조절 장치에 제 3 자에 의한 기술적인 변경을 허용하면 안 됩니다.
- Huber 와 합의되지 않은 모든 변경 사항은 온도 조절 장치의 모든 EU 적합성 선언을 무효화합니다.
- 훈련을 받은 Huber 전문가들만 변경, 수리 또는 정비 작업을 실행할 수 있습니다.
- 반드시 유의해야 할 사항:
- 온도 조절 장치는 완벽한 상태에서에서만 사용해야 합니다!
- 작동과 수리는 자격을 갖춘 직만 해야 합니다!
- 안전 장치를 무시하거나 중단시키거나 분해하거나 끄면 안 됩니다!

온도 조절 장치는 사용 설명서에 따라서 온도 조절 용도로만 사용해야 합니다.

온도 조절 장치는 산업용으로 제조되었습니다. 온도 조절 장치로 유리 혹은 금속 반응기 같은 애플리케이션 또는 실험실과 산업에서 전문적으로 편리하게 사용되는 기타 물체를 온도 조절합니다. 흐름 냉각기와 교정 용기는 전적으로 Huber 온도 조절 장치와 함께만 사용해야 합니다. 전체적인 시스템에 적합한 열 유체가 사용됩니다. 냉각 또는 가열 용량은 펌프 연결부에, 혹은 - 이용 가능하다면 - 온도 조절 용기에 제공됩니다. 기술 사양은 데이터 시트에서 확인할 수 있습니다. → 시작 페이지 57, 섹션 «부록». 온도 조절 장치는 이 사용 설명서에 나온 지침에 따라 설치하고, 셋업한 후 작동해야 합니다. 사용 설명서 미준수는 규정에 맞는 작동이 아닌 것으로 간주합니다. 온도 조절 장치는 최신 기술과 공인된 안전 규정에 부합합니다. 온도 조절 장치에는 안전 장치가 설치되어 있습니다.

1.3.4 예측 가능한 오용

의학 용품(예: 시험관 진단 절차 용품)으로 또는 직접적인 식품 온도 조절용으로 사용하는 것은 허용되지 않습니다.

온도 조절 장치는 사용 설명서에 따라서 온도 조절 용도로만 사용해야 합니다.

제조사에서는 사용 설명서를 무시한 온도 조절 장치의 기술적 변경, 온도 조절 장치의 부적절한 취급 및 사용에 따른 손상에 대해서는 아무런 책임을 지지 않습니다.

1.4 관리자와 작업 인력-의무와 필요 조건

1.4.1 관리자의 의무

사용 설명서는 쉽게 접근할 수 있게 온도 조절 장치의 바로 가까이에 보관해야 합니다. 온도 조절 장치를 다룰 자격을 충분히 갖춘 작업 인력(예: 기계 기사, 화학 전문가, CTA, 물리 전문가 등)만 온도 조절 장치를 다루어야 합니다. 작업 인력은 온도 조절 장치를 다루기 전에

훈련받아야 합니다. 작업 인력이 사용 설명서를 숙지하였는지 확인해야 합니다. 작업 인력의 정확한 책임을 정합니다. 작업 인력은 개인 보호 장비를 제공받아야 합니다.

- 관리자는 온도 조절 장치 아래에 응축수/열 유체용 드립 트레이를 설치해야 합니다.
- 드립 팬 사용은 온도 조절 장치(부대 용품 포함) 설치 구역 관련 국내법으로 규정할 수 있습니다. 관리자는 해당 국내 및 지역 규정을 검토하고 적용해야 합니다.
- 온도 조절 장치는 모든 해당 안전 기준을 준수합니다.
- 본 온도 조절 장치를 사용하는 귀하 시스템 역시 안전해야 합니다.
- 관리자는 시스템을 안전하게 설계해야 합니다.
- Huber 는 귀하 시스템의 안전을 책임지지 않습니다. 관리자가 시스템의 안전을 책임집니다.
- Huber 에서 제공하는 온도 조절 장치가 관련 안전 기준을 모두 충족하기는 하지만, 다른 시스템에 설치하면 다른 시스템의 설계에 기인하는, Huber 에서 조절할 수 없는 위험이 발생할 수 있습니다
- 시스템 총괄 책임자는 온도 조절 장치가 설치된 전체 시스템의 안전을 다룹니다.
- 온도 조절 장치의 안전한 시스템 설치 및 정비를 수월하게 하려면 <메인 스위치> [36](있는 경우)를 OFF 위치에서 잠글 수 있어야 합니다. 관리자는 지역 규정(예: 미국연방규정집 1910.147)에 따라서 에너지원 분리 이후의 폐쇄/마킹 절차를 개발해야 합니다.

1.4.1.1 도구와 소모품의 전문적 폐기

폐기가 유효한 국가의 규정에 따르는지 확인해야 합니다. 폐기에 관련된 질문이 있으시다면, 폐기를 처리 회사의 지역 전문가에게 문의하시길 바랍니다.

개요	재료/자원	폐기/청소
	포장재	차후 필요할 경우(예: 다른 곳으로 제품 이동)에 대비하여 포장재를 보관해 두시기 바랍니다.
	열 유체	전문적 폐기를 위한 조치는 사용한 열 유체의 안전 데이터 시트에서 확인하십시오. 폐기를 위해 열 유체의 원래 용기를 사용합니다.
	충전 부대 용품(예: 비커)	재사용을 위해 충전 부대 용품을 청소하십시오. 사용한 도구와 세제를 전문적으로 폐기할 수 있도록 유의하시길 바랍니다.
	타월, 걸레 같은 도구	유출 열 유체를 흡수하기 위해 사용한 도구들은 열 유체처럼 폐기해야 합니다. 청소 도구는 세제에 따라서 폐기해야 합니다.
	세제(예: 스테인리스 강 세제, 온화 세정제)	전문적 폐기를 위한 조치는 사용한 세제의 안전 데이터 시트에서 확인하십시오. 대량 폐기의 경우 세제의 원래 용기를 사용합니다.
	소모품(예: 공기 필터 매트, 온도조절 호스)	적절한 폐기를 위한 조치는 사용 소모품 데이터 시트에서 확인하실 수 있습니다.

1.4.1.2 냉매가 있는 온도 조절 장치

1.4.1.2.1 일반적인 정보

다음 섹션들에서는 사용되는 냉매에 대해 알려드리고자 합니다. 이 섹션들에서는 운영자에게 필요한 몇 가지 책임 사항을 숙지하실 수 있습니다.

모든 Huber 온도 조절 장치는 설치 장소에 쉽게 설치할 수 있도록 설계되었습니다.

온도 조절 장치에 내장 가스 경고 센서가 없습니다!

Huber 에서는 건물 측에 설치할 수 있는 적합한 가스 경고 센서와 평가 장치를 제공합니다.

시스템 운영자 책임 사항: 각 국가 법률 및 현지 규정에 따른 온도 조절 장치의 올바른 설치.

1.4.1.2.1.1 천연 냉각제가 있는 온도 조절 장치

천연 냉각제(NR)가 있는 온도 조절 장치



천연 냉각제가 든 Huber 온도 조절 장치는 1980 년부터 여러 차례 검증된 안전하고 특히 환경 친화적인 기술로 작동합니다. 온도 조절 장치는 EU 와 EFTA 회원국들의 규정에 따라 건조되었습니다. 천연 냉각제가 든 온도 조절 장치에 대한 관련 기준과 규정은 이하에서 그 준수를 당부하고 싶은 몇몇 지침을 담고 있습니다.

수랭식 온도 조절 장치는 건물 측 배기 시스템에 연결할 수 있습니다. 공랭식 온도 조절 장치는 온도 조절 장치에서 배기 공기를 설치 장소로 직접 배출합니다.

Huber 에서는 온도 조절 장치나 건물 측에 설치할 수 있는 적합한 가스 경고 센서와 평가 장치를 제공합니다.

- 냉각 회로는 기술적으로 영구 밀폐되어 있습니다.
- 온도 조절 장치는 공장에서 영구적으로 닫힌 개별 소형 장치(즉 하우징에 싸인 기능 장치)입니다.
- 냉각제의 분량이 최소화됩니다("충전 수량이 제한된 시스템"에서). 냉각제 충전량은 데이터 시트와 라벨에 명시되어 있습니다.
- 냉각제 회로는 온도 조절 장치의 사용 수명 기간 동안 정비해야 합니다.

1.4.1.2.2 관리자의 의무



- 실내 공기 m³당 냉각제 한도 초과 폭발이나 질식에 의한 사망이나 증상**
- 온도 조절 장치를 설치할 때 포함 냉각제의 분량(온도 조절 장치의 데이터 시트/라벨 참조)과 실내 크기에 유의합니다.
 - 국가 법률 및 현지 규정에 따라 설치 장소에 대한 추가 안전 예방 조치가 필요할 수 있습니다.
 - 온도 조절 장치는 **ATEX** 구역 작업에 허용되지 않았습니다.

1.4.1.2.2.1 설치 장소

본 섹션의 적용 대상: 냉각제가 있는 모든 온도 조절 장치

다음 목록은 가능한 요구 사항에 대한 불완전한 개요만 제공합니다.

냉각제를 사용하는 온도 조절 장치의 예정된 설치 장소에서 무엇보다도 준수해야 하는 사항:

- 실내 크기와 관련된 냉각제 충전량 제한.
- 기계실에 설치.
- 가스 경고 센서를 통한 모니터링.
- 실외 설치 조건.
- 고장 발생 시 전극 분리.

해당 국가 법률 및 현지 규정을 준수해야 합니다.

1.4.1.2.2.2 연결 >배기 공기< 온도 조절 장치의 [105]

본 섹션의 적용 대상: 천연 냉각제가 있는 온도 조절 장치(CO₂와 탁상형 장치 제외)

온도 조절 장치는 건물 측의 배기 시스템에 연결할 수 있도록 준비되어 있습니다. 이를 위해 <배기 공기> [105]연결부의 덮개를 제거해야 합니다.

건물 측의 배기 공기 시스템 연결(필요한 경우):

온도 조절 장치의 <배기 공기> [105] (DN 100) 연결부를 통해 건물 측의 배기 시스템에 연결됩니다. 정확한 위치는 결선도에서 확인하실 수 있습니다. → 온도 조절 장치 사용 설명서의 «부록» 섹션.

방법

- <배기 공기> [105]연결부에서 덮개를 제거하십시오. 이 덮개는 건물 측 배기 시스템을 사용하는 경우에만 제거할 수 있습니다!
- 온도 조절 장치의 <배기 공기> [105]연결부를 건물의 배기 시스템에 연결하십시오.

1.4.1.2.2.3 가스 경고 센서(옵션)가 있는 온도 조절 장치

본 섹션의 적용 대상: 천연 냉각제가 있는 온도 조절 장치(CO₂와 탁상형 장치 제외)

온도 조절 장치에는 옵션으로 제공되는 가스 경고 센서를 장착할 수 있는 장착 플레이트가 포함되어 있습니다. 운영자는 이 가스 경고 센서: 장착하고 외부에 전기 연결한 후 기능을 확인해야 합니다.

정보

자세한 정보는 가스 경고 센서에 대한 Huber 설치 지침과 제조업체의 문서에서 확인하실 수 있습니다.

기능:

- 가스 경고 센서 연결용 케이블 덕트는 결선도에 나와 있습니다.
- 가스 경고 센서로 폭발 하한선의 20%에서 안전 정지가 가능합니다. 이를 위해 운영자는 건물 측에 전원 차단 릴레이를 설치해야 합니다.
- 가스 경고 센서 관련 추가 참고 사항:
 - 내장 가스 경고 센서를 위해서는 **24 V DC**의 외부 전압 공급이 있어야 합니다. 가스 경고 센서의 경보 출력은 4 - 20 mA 신호로 이루어집니다. 설치와 가동에 필요한 기술 상세 정보는 가스 경고 센서의 데이터 시트에서 확인해 주십시오. 관리자는 이와 추가 조치에 대해 책임을 집니다.
 - 생산자의 사용 설명서에 따른 첫 시동 전가스 경고 센서의 보정과 보정 및 정비 간격 준수는 관리자가 책임집니다. 당사에서는 정보가 없는 경우에는 보정 및 정비 간격을 6 개월과 12 개월 사이로 정할 것을 권장합니다. 높은 안전 요건에 맞추려면 더 짧은 간격을 정할 수도 있습니다. 요청하면 당사에서는 보정 및 정비 작업 전문 업체를 기꺼이 소개하겠습니다.

가스 경보 센서용 평가 장치:

요청하면 전원 분리 계전기 제어용으로 별도 평가 장치를 부대 용품으로 구할 수 있습니다. 평가 장치는 영전위 전환 접촉을 제공하고 동시에 가스 경고 센서의 전압 공급과 평가를 인수합니다. 두 버전에서 관리자 측 치수와 설치가 필요합니다. 가스 경고 센서의 경보는 관리자 측에서 경보 센터로도 전달될 수 있습니다. 관리자는 이와 추가 조치에 대해 책임을 집니다.

1.4.1.3 불화계 온실 가스/냉매를 갖춘 온도 조절 장치

불화계 온실 가스 및 규정(EC) 번호 842/2006 철회 관련 2014 년 4 월 16 일자 F 가스 규정(EU) 번호 517/2014.

본 규정은 불화계 냉매를 갖춘 모든 시설에 적용됩니다. 2009 년 9 월 16 일 유럽의회와 유럽이사회(EC)의 번호 1005/2009 규정에 규정된 오존층 감소 물질이 여기에서 제외되었습니다(프레온 가스 /H-프레온 가스).

본 규정은 특정한 불화계 온실 가스의 방출, 사용, 복구 그리고 제거에 관한 규제를 정합니다. 이러한 가스를 포함하는 제품과 장비의 표기와 폐기도 마찬가지입니다. 2007 년 7 월 4 일부터, 관리자는 누출을 확인하거나 짧은 시간 내에 누출을 해결하기 위해서 비유동적인 냉동기 시스템을 정기적으로 검사해야 합니다.

규정(EC) 번호 303/2008 는 구상 중에 있는 활동을 실행할 수 있도록 허용하는 인력과 회사의 훈련과 인증의 필요 조건을 포함합니다.

관리자의 의무:

- 특정한 시설의 관리자는 특정한 불화계 온실가스에 관한 규정(EC) 번호 842/2006 에 있는 많은 의무를 이미 가지고 있습니다. 새로운 F 가스 규정으로 이러한 의무는 크게 변경되지는 않았습니다. 몇 가지 의무가 추가되었으며, 다른 의무들은 새로운 규정과 함께 달리 운색되었습니다. 관리자가 개별적으로 기존의 의무를 전체적으로 보기 위해서는 규정 문서를 확인하시길 바랍니다.
- 일반적인 방출 감소 의무.
- 냉매 시설의 관리, 수리 또는 폐기는 인증받은 회사가 시행해야 합니다. 관리자는 시행사가 이러한 인증을 받았는지의 여부를 확인해야 합니다.
- 예를 들어, 고정된 냉각 설비 시설의 누수 확인을 위한 인증된 직원(예: Huber 사의 서비스 엔지니어)에 의한 주기적인 검사. 필요한 테스트 간격은 냉매의 수량과 냉매의 종류 기반으로 결정되며 이산화탄소₂와 동등한 것으로 전환되거나 한정됩니다.
- 인증된 직원으로부터 이루어진 F-가스의 복구를 위한 설비에 관련된 관리자의 책임.
- 냉매 시스템 사용 설명서에는 사용되거나 복구된 냉매의 본질과 수량을 나타내는 서류가 필요합니다. 관리자는 작업 이후에 적어도 5 년간 본 문서를 보관하고 있어야 하며 감독관청의 요청에 제공할 수 있어야 합니다.
- 자연 냉매(NR)를 갖춘 온도 조절 장치는 본 규정에서 제외됩니다.
- 냉매의 수량과 냉매의 종류는 데이터 시트 또는 귀하의 온도 조절 장치의 네임 플레이트에서 확인할 수 있습니다.
- 검토 기간을 설정하기 위해서, 웹사이트에서 더욱 많은 정보를 제공하고 있습니다.

1.4.2 작업 인력에 대한 요구 사항

관리자의 의뢰와 지시를 받은 적절하게 인증을 받은 전문 인력만이 온도 조절 장치를 다루어야 합니다. 작업자의 최소 연령은 18 세입니다. 18 살 미만은 작동을 하는데 자격을 갖춘 전문가의 감시 아래에 온도 조절 장치를 사용할 수 있습니다. 작업 구역에 있는 작업자는 제 3 자에 대해 책임이 있습니다.

1.4.3 작업 인력의 의무

온도 조절 장치를 다루기 전에 사용 설명서를 꼼꼼하게 읽어봅니다. 안전 규정을 확인하는 것이 매우 중요합니다. 온도 조절 장치를 다룰 때에 개인 보호 장비를 착용합니다(예: 보안경, 보호 장갑, 미끄럼 방지 신발).

1.5 일반적인 정보

1.5.1 작업장 설명

작업장은 온도 조절 장치의 앞에 있는 조작 패널에 있습니다. 작업장은 고객이 연결한 주변 장치로 결정됩니다. 작업장은 이에 따라 관리자가 보장해야 하는 부분입니다. 작업장의 디자인은 또한 작업장의 작동 안전 조례(BetrSichV)와 위험 평가 관련 요건에 따라야 합니다.

1.5.2 독일 산업 표준(DIN) 12876 에 따른 안전 장치


귀하 온도 조절 장치의 등급 이름은 부록에 있는 데이터 시트에서 확인하십시오.

실험실 온도 조절 장치와 실험실 용기의 분류	등급 이름	온도 조절 액체	기술적인 필요 조건	마킹 ^{a)}
	I	불연성 ^{a)}	과열 보호 ^{c)}	NFL(불연성)
	II	인화성 ^{b)}	조정가능 과열 보호	FL 가연성
	III	인화성 ^{b)}	조정 가능 과열 보호 및 기타 저수준 보호	FL 가연성

a) 단일 오류의 온도 범위에 있어도 일반적으로 물과 다른 액체는 가연성이 아닙니다.
 b) 온도 조절 액체는 $\geq 65\text{ }^{\circ}\text{C}$ 의 발화점을 가져야 합니다.
 c) 과열 보호는 예를 들어 적절한 충전 레벨 센서 또는 적절한 온도 제한 장치를 통해 달성할 수 있습니다.
 d) 제조사의 선택으로 이루어지는 옵션.

- 히터 달린 온도 조절 장치는 등급 명칭 III/FL 에 해당합니다. 본 온도 조절 장치는 장치 이름에 "H"가 표시되어 있습니다.
- 히터 없는 온도 조절 장치는 등급 명칭 I/NFL 에 해당합니다.

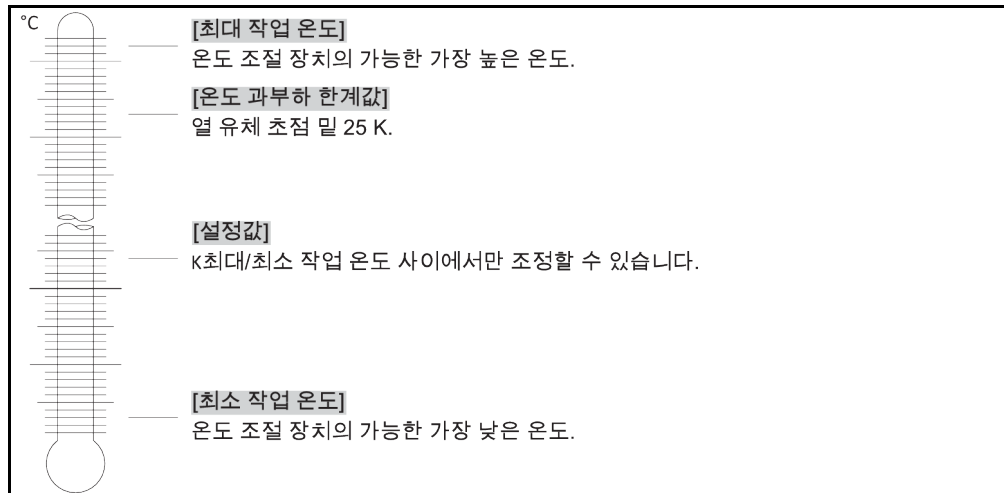온도 제한의 개요



1.5.2.1 기계 과열 보호

히터 장착 온도 조절 장치만 기계식 과열 보호 장치를 구비하고 있습니다. → 페이지 37, 섹션 «과열 보호(ÜT) 켜기».

1.5.2.2 낮은 수준 보호

가열시 **Minischiller**: 수준 관찰은 기계 플로트 게이지로 실현됩니다. 열 유체 표면에서 장치 내에서 유도되는 플로트가 부유합니다. 열 유체의 충전 레벨에 따라 전자 시스템의 플로트 장비가 상태 좋음(충분한 충전 시)이나 상태 나쁨(충분하지 못한 충전 시)을 표시합니다. 플로트의 기능은 지속적으로 기계를 가동하며 일정 간격으로 확인합니다.

1.5.3 추가적인 보호 장치

정보

비상 대응 계획 - 전원 공급 중단!
 사용하는 스위치 유형 또는 설치한 스위치 조합은 배선도에서 확인해 주십시오. → 시작 페이지 57, 섹션 «부록».

스위치 유형 개요

스위치	명칭	전원 공급 중단
	<메인 스위치> [36] (적색-황색) 또는 <메인 스위치> [36] (회색)	<메인 스위치> [36]를 "0"에 놓습니다.
	<메인 스위치> [36] (적색-황색) 및 <장치 스위치> [37] (회색):	<메인 스위치> [36]를 "0"에 놓은 다음 <장치 스위치> [37]를 "0"에 놓습니다.
	<비상 정지 스위치> [70] (적색-황색) 및 <메인 스위치> [36] (회색):	<비상 정지 스위치> [70]를 켜 다음 <메인 스위치> [36]를 "0"에 놓습니다.
	<전원 스위치> [37]	소켓을 통한 전원 연결: 플러그를 뽑은 다음 <전원 스위치> [37]를 "0"에 놓으십시오. 고정 배선을 통한 전원 연결: 건물 측 분리 장치를 사용한 다음 <전원 스위치> [37]를 "0"에 놓으십시오.
-	스위치가 없거나 하우스징 내부	소켓을 통한 전원 연결: 플러그를 뽑으십시오. 고정 배선을 통한 전원 연결: 건물 측 분리 장치를 사용하십시오.

1.5.3.1 전원 차단

정전 이후에(혹은 온도 조절 장치가 켜졌을 때) 온도 조절이 되어야 하는 방법을 본 기능으로 확인할 수 있습니다.

자동-시작 기능 꺼짐

온도 조절은 온도 조절 장치의 전원을 켜 후 수동 입력을 통해 시작됩니다.

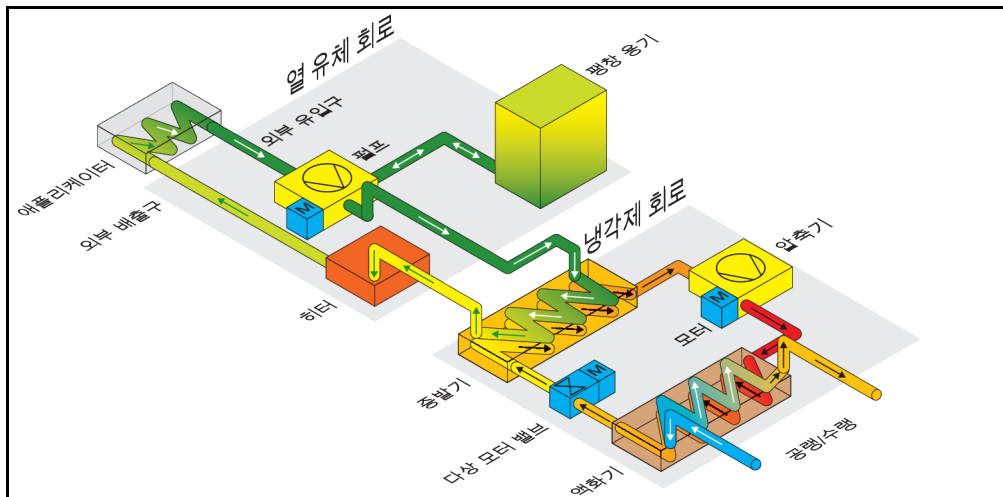
자동-시작 기능 켜짐

온도 조절 장치는 정전 발생 전과 동일한 상태로 전환됩니다. 예를 들어, 정전 발생 전: 온도 조절이 꺼졌습니다; 정전 발생 후: 온도 조절이 꺼졌습니다. 정전일 때 온도 조절이 활성화 상태였다면, 정전 이후에 자동적으로 계속됩니다.


→ 페이지 35, 섹션 »자동-시작 기능 변경«.

1.6 냉각 버전 도시


보기: 공랭 및 수랭



공랭: 공기 유입구

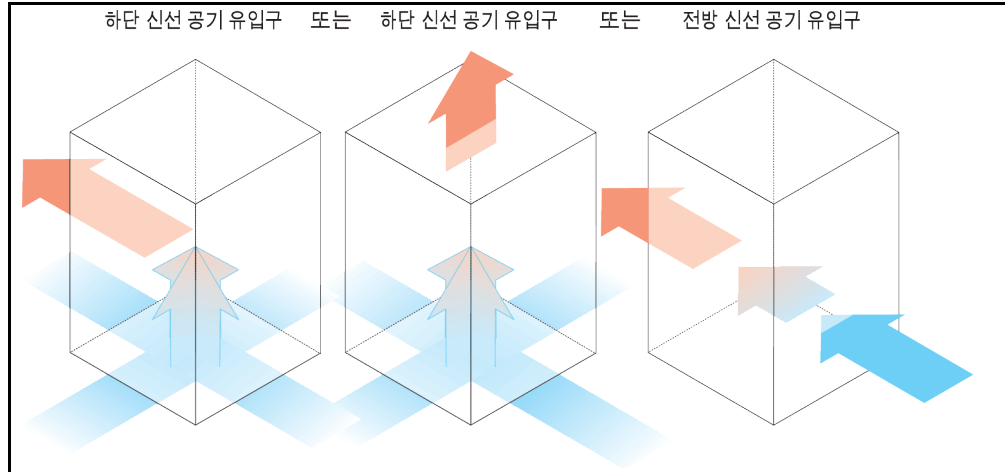

수랭: 물 커넥터

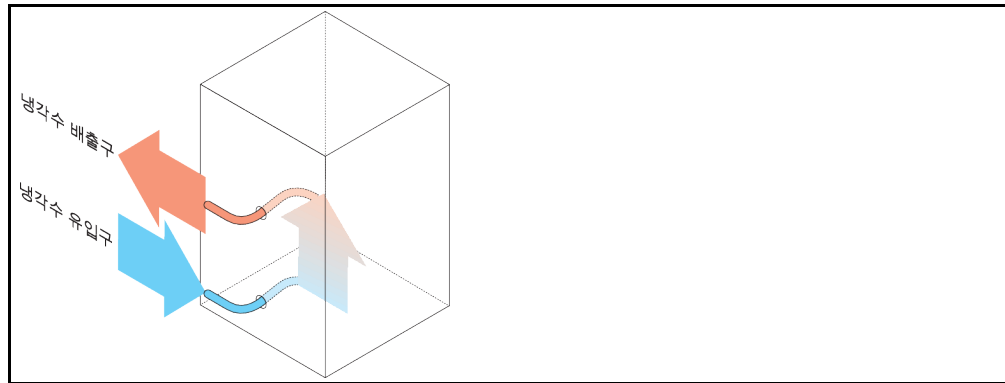

1.6.1 에너지 배출이 불충분한 경우의 영향

실내 공기/냉각수

콘덴서 핀 오염 같은 것에 의한 영향, 온도 조절 장치와 벽/통벽의 너무 짧은 거리, 너무 따뜻한 실내 공기/냉각수, 너무 약한 냉각수 차압, 필터 스크린 오염: 냉각제 회로의 냉각제는 유입 에너지를 더 이상 완전히 실내 공기/냉각수에 전달할 수 없습니다. 이로써 액화 냉각제를 충분히 사용할 수 없게 되어, 응결 온도와 에너지 흡수가 증가합니다.

냉각제 회로

불충분한 냉각제 분량/증가하는 응결 온도의 영향: 증발기에서는 더 이상 냉각제 회로에서 완전한 냉각 성능을 이용할 수 없습니다. 이것은 열 유체 회로의 에너지 전달 감소를 의미합니다.

열 유체 회로

열 유체의 불충분한 에너지 방출의 영향: 열 유체는 제한적으로만 애플리케이션에서 에너지를 배출할 수 있습니다.

애플리케이션

애플리케이션의 불충분한 에너지 방출의 영향: 애플리케이션에서 발생하는 에너지(발열)는 더 이상 완전히 배출할 수 없습니다.

온도 조절 장치

최적의 성능 조정을 위해 온도 조절 장치에서는 전자 제어 팽창 밸브가 사용됩니다. 허용 주변 온도 범위 내에서 팽창 밸브는 항상 최대 가능 냉각 성능을 제공합니다. 상한 범위(최대 허용 주변 온도)에 도달 시 온도 조절 장치가 꺼집니다.

2 시동

2.1 시설 내의 운반

⚠ 경고

온도 조절 장치가 본 사용 설명서의 사양에 따라서 운반/이동되지 않습니다
압착으로 인한 사망이나 증상

- 본 설명서의 지시에 따라서만 온도 조절 장치를 운반/이동합니다.
- 운반 시에 개인 보호 장비를 착용해야 합니다.
- 롤러로 온도 조절 장치를 이동할 때에(장비를 갖췄다면) 명시된 인원 수는 초과하면 안 됩니다.
- 온도 조절 장치가 잠금 브레이크를 가진 바퀴를 장착했다면: 온도 조절 장치를 이동할 때에는 항상 자유롭게 사용할 수 있는 2 개의 잠금 브레이크가 있어야 합니다. 비상 시에는 이 2 개 잠금 브레이크를 활성화시켜야 합니다! 비상 시에 롤러에서 잠금 브레이크 한 개만 활성화되면: 온도 조절 장치는 멈추지 않으며 움직이는 잠금 브레이크가 있는 롤러의 축을 따라서 돕니다!

알아두기

온도 조절 장치는 누여서 운반합니다

압축기 물적 손상

- 온도 조절 장치는 세워서만 운반합니다.

알아두기

채워진 온도 조절 장치가 운반됩니다

열 유체의 넘침에 의한 물적 손상

- 비운 온도 조절 장치만 운반합니다.

- 있는 경우, 상단부의 고리를 사용하여 온도 조절 장치를 운반합니다.
- 운반에는 산업용 트럭을 사용합니다.
- 온도 조절 장치의 롤러는 수송에 적합하지 않습니다. 롤러들에는 온도 조절 장치 전체 질량의 25 %와 각각 대칭적으로 적재합니다.
- 우선 설치 장소에서 포장재(예: 팰릿)를 제거해야 합니다.
- 온도 조절 장치는 운반 피해로부터 보호되어야 합니다.
- 온도 조절 장치를 보조 기기 없이 단독으로 운반해서는 안 됩니다.
- 운반 경로와 현장의 적재 사양을 확인합니다.
- 온도 조절 장치를 작동시키기 전에 롤러에 있는 잠금 브레이크(만약 있다면)를 활성화시키고/거나 받침대(만약 있다면)를 제거/활성화시켜야 합니다. → 페이지 29, 섹션 «받침대(있다면) 제거/활성화».

2.1.1 온도 조절 장치의 리프팅과 운반

2.1.1.1 운반 러그 없는 온도 조절 장치

- 온도 조절 장치를 혼자서 보조 수단 없이 들어서 옮기지 마세요.
- 오직 산업용 트럭으로만 온도 조절 장치를 들어서 옮깁니다.
- 산업용 트럭은 최소한 온도 조절 장치의 무게와 동등한 양력을 가져야 합니다. 온도 조절 장치의 중량은 데이터 시트에서 확인하실 수 있습니다. → 시작 페이지 57, 섹션 «부록»에서 확인하십시오.

2.1.2 온도 조절 장치의 배치

2.1.2.1 롤러를 갖춘 온도 조절 장치

- 롤러는 설치 장소로 운반하기 위해 사용하지 마세요. → 페이지 22, 섹션 «온도 조절 장치의 리프팅과 운반».
- 오로지 설치 장소의 위치를 결정하는데 롤러를 사용합니다.
- 표면이 평평하고 경사가 없고 미끄러짐이 없고 하중을 지지할 수 있는 경우에만, 온도 조절

- 장치는 롤러 위에서 움직일 수 있습니다.
- 온도 조절 장치를 혼자 옮겨서는 안 됩니다.
- 롤러 위에서 온도 조절 장치를 움직이려면 최소 2 명이 필요합니다. 온도 조절 장치 전체 무게가 1.5 톤을 넘으면, 롤러 위에서 온도 조절 장치를 움직이는 데 최소 5 명이 필요합니다.
- 온도 조절 장치를 작동시키기 전에 롤러에 있는 잠금 브레이크를 활성화시키고/거나 받침대(만약 있다면)를 제거/활성화시켜야 합니다. → 페이지 29, 섹션 «받침대(있다면) 제거/활성화».

2.1.2.2 롤러가 장착되지 않은 온도 조절 장치

- 온도 조절 장치를 배치하는데는 산업용 트럭을 사용해야 합니다.
- 온도 조절 장치를 혼자 옮겨서는 안 됩니다.
- 온도 조절 장치를 움직이려면 최소 2 명이 필요합니다.
- 산업용 트럭은 최소한 온도 조절 장치의 무게와 동등한 양력을 가져야 합니다. 온도 조절 장치의 중량은 데이터 시트에서 확인하실 수 있습니다. → 시작 페이지 57, 섹션 «부록».
- 온도 조절 장치를 사용하기 전에 받침대(만약 있다면)를 제거/활성화시켜야 합니다. → 페이지 29, 섹션 «받침대(있다면) 제거/활성화».

2.2 언패킹



경고

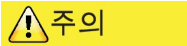
손상된 온도 조절 장치 작동
감전사 위험

- 손상된 온도 조절 장치를 작동시키면 안 됩니다.
- 고객 지원 센터에 연락하시길 바랍니다. → 페이지 55, 섹션 «연락 정보».

방법

- 포장에서 손상을 찾아보시길 바랍니다. 온도 조절 장치에 있는 손상이 보일 수도 있습니다.
- 운반 피해를 확인하기 위해서 언패킹할 때 온도 조절 장치를 확인하시길 바랍니다.
- 분쟁 해결을 해야 한다면 전적으로 운반 회사에 연락하시길 바랍니다.
- 포장재의 전문적 폐기에 유의하십시오. → 페이지 15, 섹션 «도구와 소모품의 전문적 폐기».


2.3 환경 조건



주의

적절하지 않은 주변 조건/적절하지 않은 설치
압착으로 인한 증상

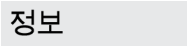- 모든 사양을 준수하십시오! → 페이지 23, 섹션 «환경 조건» 및 → 페이지 25, 섹션 «설치 조건».



정보

위치에서 순환 펌프와 압축기에 신선한 공기가 충분히 있도록 확인하시길 바랍니다. 뜨거운 배기 공기가 막힘 없이 상단으로 나가야 합니다.

표준 모델

데이터 시트에서 배선 정보를 확인하십시오. → 페이지부터 57, 섹션 «부록».

온도 조절 장치는 현재 유효한 독일 산업 표준 유럽 표준(DIN EN) 61010-1 에 따라 일반적인 환경 조건에서만 사용해야 합니다.

- 내부 전용. 빛의 조명도는 적어도 300 lx 이어야 합니다.
- 설치 높이는 해발 2000 미터까지 가능합니다.
- 충분한 공기 교환을 위해 벽과 천장 거리를 유지합니다(폐열의 제거, 온도 조절 장치와 작업장을 위한 신선한 공기 공급). 공랭 온도 조절 장치에서 충분한 지상고를 확보해야 합니다. 온도 조절 장치는 카톤 박스 또는 작은 용기에서 사용하지 마십시오. 그렇지 않으면 공기 교환이 막힐 것입니다.
- 주위 온도값은 기술적인 데이터 시트에서 확인하시길 바랍니다. 문제 없이 작동되기 위한

환경 조건을 따르는 것이 절대적으로 필요합니다.

- 상대 대기 습도는 최대 80 %에서 32 °C 그리고 40 °C 이상이며 연속적으로 50 %로 감소합니다.
- 짧은 거리의 전원 포트.
- 온도 조절 장치는 절연 설비(전원) 접촉이 어려워지거나 방해되도록 설치해두면 안 됩니다.
- 전압 변동의 크기는 데이터 시트에서 확인하실 수 있습니다. → 페이지부터 57, 섹션 «부록».
- 과도 과전압은 일반적으로 전원 공급 기구 시스템에서 일어날 수 있습니다.
- 설치 등급 3
- 해당하는 오염 정도: 2.
- 과전압 카테고리 II.

유의: → 페이지 20, 섹션 «냉각 버전 도시».

벽과의 간격

		간격 cm	
페이지	공랭	수랭	
[A1] 위	상단의 공기 출구: 분리됨	-	
[A2] 위	아래에 설치	아래에 설치	
[B] 왼쪽	최소 20	최소 10	
[C] 오른쪽	최소 20	최소 10	
[D] 앞	최소 20	최소 10	
[E] 뒤	최소 20	최소 20	
		간격 cm(수조에서 작동 시)	
페이지	공랭	수랭	
[A1] 위	상단의 공기 출구: 분리됨	-	
[A2] 위	아래에 설치	아래에 설치	
[B] 왼쪽	최소 20	최소 20	
[C] 오른쪽	최소 20	최소 20	
[D] 앞	최소 20	최소 20	
[E] 뒤	최소 20	최소 20	

2.3.1 EMC 구체 정보

정보

연결 파이프 전반

온도 조절 장치와 온도 조절 장치의 외부 애플리케이션 연결 장치의 고장 없는 작동의 전제 조건: 설치와 배선은 전문적으로 수행해야 합니다. 관련 주제: "전기 안전" 및 "EMC 적합 배선".

케이블 길이

3 미터를 넘는 유연/고정 케이블 가설 시 특히 유의해야 할 사항:

- 전위 균형, 접지(이와 관련하여 기술 불리틴 "전자기 친화성 EMC"도 참조)
- "외부" 및/또는 "내부" 피뢰/과전압 방지.
- 설계적 보호 조치, 전문적인 케이블 선택(자외선 방지, 강철관 보호 등)

준수:

관리자는 여기서 국내/국제 지침 및 법률을 준수할 책임이 있습니다. 여기에는 설치/배선의 법률 및 기준에 따른 검사도 포함됩니다.

이 장치는 "산업 전자기 환경" 에서의 작업에 적합합니다. 이 장치는 이러한 환경에 요구되는 현행 **EN61326-1** 의 "간섭 내성 요건"을 충족합니다.

또한 이 환경에 대한 "간섭 방출 요건"도 충족합니다. 현행 **EN55011** 에 따르면, **그룹 1** 및 **클래스 A** 장치입니다.

다른 환경에서 온도 조절 장치를 가동하는 경우 드물게는 전자기 호환성을 보장할 수 없습니다.

그룹 1 은 고주파(HF)가 장치의 기능에만 사용된다는 것을 나타냅니다. **클래스 A** 는 준수해야 할 간섭 방출 한계값을 결정합니다.

2.4 설치 조건

경고

온도 조절 장치가 전위 케이블 위에 설치됩니다
전원 케이블의 손상으로 감전사

- 온도 조절 장치는 전원 케이블 위에 설치하지 마세요.

주의

브레이크를 작동시키지 않고 롤러와 함께 온도 조절 장치 작동
부품 충돌

- 롤러의 브레이크 작동.

- 온도 조절 장치가 추운 환경에서 따뜻한 환경으로(혹은 그 반대로) 익숙해지는데 대략 2 시간이 걸립니다. 온도 조절 장치가 그 전에 켜져야 합니다!
- 수직적이고 안정적이며 기울어지지 않은 위치.
- 불연성이며 밀집한 표면 사용.
- 깨끗한 환경 유지: 미끄러짐과 넘어지는 위험 요소 방지.
- 바퀴가 있다면, 설치 이후에는 잠궤야 합니다!
- 열 유체 유출/누출된 것은 즉시 제거되어야 합니다. 열 유체 및 보조제의 적절한 폐기에 유의하십시오. → 페이지 15, 섹션 «도구와 소모품의 전문적 폐기».
- 큰 장치의 하중 용량에 주의하십시오.
- 주변 조건에 유의하십시오.

2.5 권장되는 온도 조절 및 냉각수 호스

! 주의

- 부적절한/결함이 있는 호스 및/또는 호스 연결부 사용 위반
- 열 유체
 - 온도 조절 호스를 선택할 때는 허용되는 압력과 온도 범위에 유의하십시오.
 - 전문적인 호스 및/또는 호스 연결부를 사용합니다.
 - 규칙적인 간격에서 견고함을 확인하고 호스와 호스 연결부의 품질을 확인하고 필요하다면 적절한 조치(대체)를 취합니다.
 - 접촉/기계 부하에 대비하여 격리된 혹은 보존된 온도 조절 호스.
 - 냉각수
 - 높은 안전 요건에 맞추기 위해 강화 호스를 사용해야 합니다.
 - 잠깐 정지할 때에도(예컨대 하루밤이라도) 온도 조절 장치로 가는 냉각수 공급 장치를 닫습니다.

! 주의

- 뜨거운 혹은 차가운 열 유체와 표면 사지의 화상
- 열 유체 표면과 직접 접촉을 피하십시오.
 - 개인 보호 장비(예: 내온도성 보호 장갑, 보안경, 안전화)를 사용하시길 바랍니다.

! 주의

- 열 유체 회로의 커넥터와 호스에 제멋대로 얼음이 얼
미끄러지고 넘어질 위험
- 마이너스 범위에서 온도 조절이 되면, 열 유체 회로의 호스와 커넥터에 얼음이 얼니다. 이것은 습기의 응축과 동결에 의해 이루어집니다.
 - 얼음의 강도를 체크하십시오. 얼음이 너무 크면, 온도 조절 장치가 넘어질 위험이 커집니다. 이 경우 넘어지지 않도록 온도 조절 장치를 보호하십시오.
 - 얼음 밑의 땅에 응결수가 있는지 체크하십시오. 응결수를 적합한 용기에 담거나 정기적으로 철저히 제거하십시오. 이렇게 하면 응결수에 미끄러질 위험을 방지하실 수 있습니다.

애플리케이션의 연결을 위해서, 오직 사용 열 유체와 호환되는 온도 조절 호스만을 사용하십시오.

- 귀하의 온도 조절 장치에 오로지 격리된 온도 조절 호스를 사용하는 것을 권장합니다. 관리자는 연결에서 절연 처리를 하는데 책임을 지고 있습니다.
- 냉각수 공급 장치에 연결하려면 전적으로 강화 호스만 사용하는 것이 좋습니다. 냉각수와 절연 온도 조절 호스는 Huber 카탈로그의 부대 용품 항목에서 확인하실 수 있습니다.

2.6 렌치 크기 및 토크

온도 조절 장치의 펌프 커넥터용으로 생기는 렌치 구멍들에 유의하십시오. 다음 표들은 펌프 커넥터, 여기서 생기는 렌치 구멍 그리고 토크값을 수록하고 있습니다. 이어서 누출 검사를 항상 해야 하고 필요 시 연결 장치를 다시 조여야 합니다. 최대 토크값(표 참조)은 초과하면 안 됩니다. 펌프 연결부를 제자리에 고정하여 허용되지 않는 비틀림으로부터 보호합니다.

개요 렌치 구멍 및 토크	연결부	캡너트 렌치 구멍	연결 피스 렌치 구멍	권장 토크(Nm)	최대 토크(Nm)
	M16x1	19	17	30	35
	M24x1.5	27	27	47	56
	M30x1.5	36	32	79	93
		36	36	79	93
	M38x1.5	46	41/46	130	153
	M45x1.5	50	50	200	210

연결부	캡너트 렌치구멍	연결 피스 렌치구멍	권장 토크(Nm)	최대 토크(Nm)
G 스레드(평면 밀폐)	사용 플랫폼 싼 재료에 토크를 맞추십시오. 온도 조절 호스를 우선 손으로 조이십시오. 어댑터 피스 사용 시 온도 조절 호스를 연결할 때 펌프 연결부의 G 스레드를 너무 조여서는 안 됩니다. 어댑터 피스에 온도 조절 호스를 연결할 때 너무 조이지 않도록 G 스레드를 보호하십시오.			

2.7 수랭을 갖춘 온도 조절 장치

⚠ 경고

이슬점 미달 시 온도 조절 장치 밑의 열린 전기 케이블 전기 케이블에 물이 스며들면 감전사

- 이슬점 미달 시 온도 조절 장치 안과 냉각수 커넥터들에 응축이 일어날 수 있습니다. 응축은 냉각수 전달 부품의 높은 습도 때문에 발생합니다. 이 경우 온도 조절 장치 밑으로 응결수가 샐니다.
- 온도 조절 장치 바로 밑의 전기 케이블은 액체가 스며들지 않도록 보호해야 합니다.

⚠ 주의

부적절한/결함이 있는 호스 및/또는 호스 연결부 사용 위반

- 열 유체
- 온도 조절 호스를 선택할 때는 허용되는 압력과 온도 범위에 유의하십시오.
- 전문적인 호스 및/또는 호스 연결부를 사용합니다.
- 규칙적인 간격에서 견고함을 확인하고 호스와 호스 연결부의 품질을 확인하고 필요하다면 적절한 조치(대체)를 취합니다.
- 접촉/기계 부하에 대비하여 격리된 혹은 보존된 온도 조절 호스.
- 냉각수
- 높은 안전 요건에 맞추기 위해 강화 호스를 사용해야 합니다.
- 잠깐 정지할 때에도(예컨대 하루밤이라도) 온도 조절 장치로 가는 냉각수 공급 장치를 닫습니다.

알아두기

부식 방지되지 않음
온도 조절 장치의 물적 손상

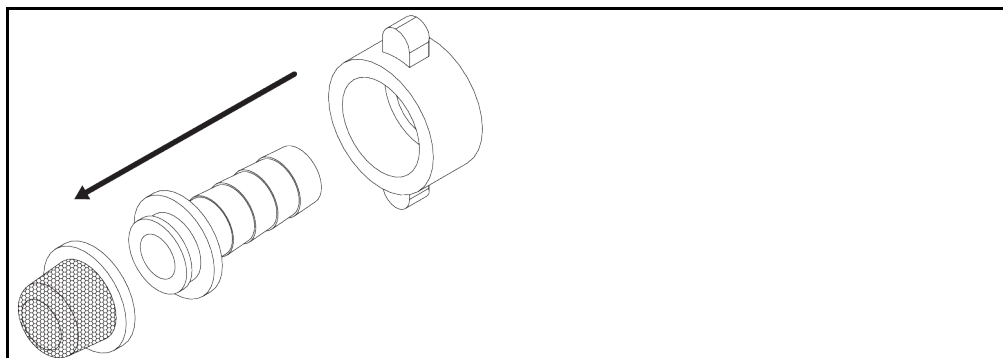
- 물 회로가 염분 침투(클로라이드, 브로마이드)로 오염되는 경우, 부식 억제제 추가는 필수입니다.
- 냉각수와 함께 냉각수 회로에 사용하는 재료의 안정성을 확보해야 합니다. 사용 재료는 데이터 시트 → 시작 페이지 57, 섹션 «부록»에서 확인하십시오.
- 적합한 조치를 통해 보증 청구권을 확보하십시오.
- 수질 관련 정보는 www.huber-online.com 에서 확인하실 수 있습니다.

알아두기


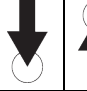
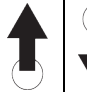

물 냉각을 위한 여과되지 않은 강물/호숫물이나 바닷물의 이용
온도 조절 장치의 물적 손상

- 여과되지 않은 강물/호숫물은 깨끗하지 않아 물 냉각에 부적합합니다.
- 수도물이나 여과된 강물/호숫물만 물 냉각에 사용합니다.
- 바닷물은 물 냉각에 사용하면 안 됩니다.
- 수질 관련 정보는 www.huber-online.com 에서 확인하실 수 있습니다.

필터 스크린을 설치(테이블 모델만)



다음 기호들은 냉각수 연결부 근처의 온도 조절 장치에 있습니다. 표를 통해 사용한 기호의 개요를 볼 수 있습니다.

개요	기호	설명
		냉각수 연결부
		냉각수 유입구
		냉각수 배출구
		냉각수 배출관

수랭을 갖춘 온도 조절 장치의 준비:

정보

냉각수 소비를 최소한으로 줄이기 위해서, 냉각수 조절 장치가 Huber 온도 조절 장치에서 수랭으로 사용됩니다. 온도 조절 장치에 필요한 부하 전류만큼 많은 냉각수가 흐르도록 합니다. 적은 양의 냉각 용량이 있다면, 또한 적은 양의 냉각수가 사용될 것입니다. 꺼진 상태에서, 냉각수의 흐름을 배제할 수 없습니다. 잠깐 정지할 때에도(예컨대 하루밤이라도) 온도 조절 장치로 가는 냉각수 공급 장치를 닫습니다.

수랭을 위한 식수 이용: 건물 측에서는 냉각수 배관에서 식수 공급관으로 역류하는 것을 방지해야 합니다. 관리자는 자신에게 적용되는 국가 및 지역 규정을 확인하고 적용해야 합니다.

관리자는 실외 설치 시 냉각수 왕복관에 동파가 발생하지 않도록 해야 합니다. 냉각수 온도는 3 °C 이상이어야 합니다. 주변 온도가 3 °C 미만일 경우 냉각수 공급 장치를 가열해야 합니다.

냉각수 회로의 최소 압력차 및 권장 냉각수 공급 온도는 데이터 시트. → 시작 페이지 57, 섹션 «부록»에서 확인하십시오.

결선도에 유의하십시오. → 페이지부터 57, 섹션 «부록».

방법

- (있는 경우) <냉각수 배출관> [15]을 닫으십시오.
- <냉각수 배출구> [14]를 물 역류관과 연결하십시오. 이러한 목적으로 봉인이 되어야 합니다.
- 필터 스크린(스트레이너)를 <냉각수 흡입구> [13]에 삽입하십시오.
- <냉각수 흡입구> [13]를 물 공급 장치와 연결하십시오.

알아두기

누출되는 냉각수 연결

공간 범람에 의한 물적 손상

- 건물 측의 냉각수 왕복관 차단 밸브를 천천히 여십시오.
- 냉각수 연결부 누수 시: 냉각수 왕복관을 즉시 차단합니다.
- 냉각수 연결부 누수를 확인하시길 바랍니다.

- 급수선 차단 밸브를 온도 조절 장치에서(있는 경우) 그리고 건물 측면에서 여십시오.
- 연결 장치가 단단히 밀폐되어 있는지 점검하시기 바랍니다.

2.8 작동 준비

2.8.1 받침대(있다면) 제거/활성화



받침대는 온도 조절 장치의 작동에 앞서 제거/ 활성화시킵니다
 압착으로 인한 사망이나 중상

- 온도 조절 장치의 작동에 앞서 롤러에 있는 잠금 브레이크(있다면)를 작동시키고/거나 받침대를 제거/활성화시켜야 합니다.
- 롤러에 있는 활성화된 잠금 브레이크(있다면) 및/또는 제거/활성화된 받침대 없이 온도 조절 장치를 작동시킬 수 있습니다.

받침대는 온도 조절 장치의 작동에 앞서 제거/활성화시켜야 합니다.
 고르지 않은 표면에 이러한 받침대를 두어서 균형을 맞출 수 있습니다.

방법

- 롤러에 있는 잠금 브레이크(있다면)가 활성화되었는지 체크하십시오.
- 조절 가능한 받침대 열기.
- 조절 가능한 받침대로 바닥을 고르게 만들었습니다. 온도 조절 장치를 수평 정렬하기 위해 수위를 사용합니다.
- 위치한 받침대에서 온도 조절 장치의 조정 이후에 나사를 조여놓습니다. 즉, 받침대의 높이가 작동 중에 변경될 수 없습니다.

2.8.2 무소음 작동(옵션) 활성화/비활성화

무소음 작동
 활성화/비활성화



온도 조절 장치에서 무소음 작동을 활성화하면, 펌프의 용량이 줄어 소음 레벨이 감소합니다.
<펌프 회전수 변경> [114] 스위치의 정확한 위치는 결선도에서 확인하십시오. → 시작 페이지 57, 섹션 «부록».

방법

- 무소음 작동을 비활성화하려면 온도 조절 장치의 **<펌프 회전수 변경> [114] 스위치**를 누르십시오. 펌프 용량 및 소음 레벨이 증가합니다.
- 무소음 작동을 활성화하려면 온도 조절 장치의 **<펌프 회전수 변경> [114] 스위치**를 다시 누르십시오. 펌프 용량 및 소음 레벨이 감소됩니다.
- 활성화나 비활성화를 통해 무소음 작동 모드를 선택하십시오.

2.8.3 수집 용기 설치

방법

- 온도 조절 장치의 **<일류관> [12]** (있는 경우)에 적합한 호스를 장착하십시오. 호스는 열 유체 및 온도와 맞아야 합니다.
- 호스의 다른 끝을 적합한 수집 용기에 꽂으십시오.

2.8.4 기능성 접지 연결

방법

- 필요한 경우, 온도 조절 장치의 <기능성 접지 연결> [87]를 건물 측 접지 지점에 연결하십시오. 스위치 캐비닛에는 버전에 따라 추가 기능성 접지 연결이 있을 수 있습니다. 각각 접지 밴드를 사용하십시오. 정확한 위치는 결선도에서 확인하실 수 있습니다. → 시작 페이지 57, 섹션 «부록»에서 확인하십시오.

2.9 외부 폐쇄형 애플리케이션에 연결하기

결선도에 유의하십시오. → 페이지부터 57, 섹션 «부록».

2.9.1 외부 폐쇄형 애플리케이션 연결

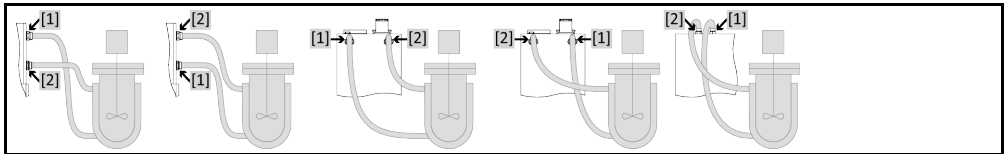
알아두기

애플리케이션 내 초과 압력(예를 들어 유리 장비에서 0.5bar 초과)

애플리케이션의 물적 손상

- 온도 조절 장치 데이터 시트의 최대 시스템 압력을 준수하십시오. → 시작 페이지 57, 섹션 «부록».
- 압력 초과 보호 설비를 갖추어 애플리케이션 손상을 방지하시기 바랍니다.
- 온도 조절 장치에서 애플리케이션으로 그리고 애플리케이션에서 온도 조절 장치로 가는 흡입구/배출구에는 밸브/급속 커플링을 설치하지 마세요.
- 지정된 최대 공급 압력이 짧은 시간 동안 초과될 수 있습니다. 시스템의 환류가 갑자기 차단되거나 예기치 않은 오류가 발생하는 경우.
- **밸브/급속 커플링이 필요한 경우:**
- 애플리케이션에(흡입구와 배출구에 각각) 직접 과압 보호 장치를 설치하시기 바랍니다.
- 애플리케이션으로 가는 밸브/급속 커플링 앞에 바이패스를 설치하시기 바랍니다.
- 적합한 부대 용품(예컨대 감압 바이패스)은 Huber 카탈로그에서 확인하시기 바랍니다.

보기: 외부 폐쇄형 애플리케이션 연결



애플리케이션이 올바르게 작동하고 시스템에 기포가 남지 않도록 하려면, 온도 조절 장치의 <순환 출구> [1] 연결부가 애플리케이션의 아래쪽 연결 지점에 연결되고 온도 조절 장치의 <순환 입구> [2] 연결부가 애플리케이션의 위쪽 연결 지점에 연결되는지 확인하셔야 합니다. <팽창 용기> [18] 없는 온도 조절 장치에서 애플리케이션의 하부 연결 지점이 연결부 <순환 입구> [2]와 높이가 동일하거나 본 연결부보다 다소 더 높다는 데 유의하십시오.

방법

- <순환 출구> [1] 및 <순환 입구> [2] 연결 장치에서 나사 플러그를 제거하십시오.
- 그리고 나서 적합한 열 유체 호스들을 통해 애플리케이션을 온도 조절 장치에 연결하십시오. 렌치 구멍이 표시된 표에 유의하십시오. → 페이지 26, 섹션 «렌치 크기 및 토크».
- 연결 장치가 단단히 밀폐되어 있는지 점검하시기 바랍니다.

2.10 전원 연결

정보

지역 조건을 기반으로 하여, 기존에 제공되는 전원 케이블 대신에 다른 전원 케이블을 사용해야 할 수도 있습니다. 온도 조절 장치를 언제나 문제없이 전원에서 분리하기 위해서 3m 보다 긴 전원 케이블을 사용하지 마십시오. 자격을 갖춘 전기 기사가 전원 케이블을 대체하도록 하시길 바랍니다.

2.10.1 보호 접촉 기능을 가진 접지 소켓을 통한 연결(PE)

위험	<p>보호 접촉 기능(PE)이 없는 전원 소켓 연결 감전사 위험</p> <ul style="list-style-type: none"> 온도 조절 장치는 보호 접촉 기능(PE)을 갖춘 전원 소켓에만 연결합니다.
위험	<p>손상된 전원 케이블/전원 커넥터 감전사 위험</p> <ul style="list-style-type: none"> 온도 조절 장치를 가동하지 마세요. 온도 조절 장치를 전원 포트에서 분리합니다. 전기 기사에게 전원 케이블/전원 커넥터의 교체 및 확인을 맡깁니다. 3m 보다 긴 전원 케이블을 사용하지 마십시오.
알아두기	<p>잘못된 전원 공급 기구 연결 온도 조절 장치의 재료 손상</p> <ul style="list-style-type: none"> 건물의 전원 전압과 주파수가 라벨에 있는 온도 조절 장치와 일치해야 합니다.
정보	<p>가지고 있는 보호 접촉 기능(PE)에 대한 의구심이 있는 경우에 전기 기사가 연결을 확인합니다.</p>

2.10.2 배선 연결

위험	<p>전원 연결/접속을 전기 기사가 하지 않습니다 감전사 위험</p> <ul style="list-style-type: none"> 전원 연결/접속을 전기 기사에게 맡깁니다.
위험	<p>손상된 전원 케이블/전원 커넥터 감전사 위험</p> <ul style="list-style-type: none"> 온도 조절 장치를 가동하지 마세요. 온도 조절 장치를 전원 포트에서 분리합니다. 전기 기사에게 전원 케이블/전원 커넥터의 교체 및 확인을 맡깁니다. 3m 보다 긴 전원 케이블을 사용하지 마십시오.
알아두기	<p>잘못된 전원 공급 기구 연결 온도 조절 장치의 재료 손상</p> <ul style="list-style-type: none"> 건물의 전원 전압과 주파수가 라벨에 있는 온도 조절 장치와 일치해야 합니다.

3 기능 설명

3.1 온도 조절 장치의 기능 설명

3.1.1 일반적인 기능

냉각 장치는 주로 공정의 열을 제거하기 위해서, 냉각수(식수)에 대한 저비용의 대안으로 사용되는 온도 조절 장치입니다.

강력한 냉각 기술로 해당되는 짧은 냉각 속도에 도달합니다.

3.1.2 다른 기능

통합된 회전수 제어 펌프 덕분에 회전수나 압력을 제어하고 이로써 각각의 용도에 맞게 최적으로 조정할 수 있습니다. LED 디스플레이를 통해 현재 온도를 읽으실 수 있습니다. 간단한 키보드를 통해 새로운 설정값을 편리하게 입력할 수 있습니다.

옵션으로 온도 조절 장치에 디지털 인터페이스(RS232)를 추가하실 수 있습니다.

히터 장착 온도 조절 장치는 제어 회로와 무관한, DIN EN 61010-2-010 에 따른 과열 보호입니다.

3.2 열 유체에 관한 정보

! 주의

사용되는 열 유체의 안전 데이터 시트의 미준수 위반

- 눈, 피부, 기도에 상해를 끼칠 수 있는 위험이 있습니다.
- 사용되는 열 유체의 안전 데이터 시트는 반드시 사용 전에 읽어야 하며, 내용을 따라야 합니다.
- 지역 법규와 작동 설명서를 주의하시길 바랍니다.
- 개인 보호 장비(예: 내온도성 보호 장갑, 보안경, 안전화)를 사용하시길 바랍니다.
- 작업장에 있는 흙이나 오염으로 인해 미끄러질 수 있는 위험이 있습니다. 작업장을 청소하고, 열 유체와 보조제의 적절한 폐기에 유의하십시오. → 페이지 15, 섹션 «도구와 소모품의 전문적 폐기».

알아두기

온도 조절 장치와 열 유체의 호환성을 준수하지 않을 시 물적 손상

- 귀하의 온도 조절 장치 등급 분류가 독일 산업 표준(DIN) 12876 에 부합하는지 유의하십시오.
- 다음 재료들의 열 유체 내구성이 보장되어야 합니다: 스테인레스 스틸 1.4301/1.4401(V2A), 구리, 니켈, 플루오로일래스토머, 청동/황동, 은납 및 플라스틱.
- 열 유체의 최대 점성은 최저 작동 온도에서 50 mm²/s 를 초과해서는 안 됩니다!
- 열 유체의 최대 밀도는 1 kg/dm³를 초과하면 안 됩니다!

알아두기

열 유체 회로에서 다양한 유형의 열 유체가 섞이게 되면 물적 손상

- 다양한 유형의 열 유체를 혼합하지 마시길 바랍니다(예를 들어, 미네랄 오일, 실리콘 오일, 합성 오일, 물 등).
- 열 유체 종류를 다른 것으로 변경할 때 열 유체 회로를 반드시 세척해야 합니다. 열 유체 사이클에 기존에 사용된 열 유체의 잔여물이 남아 있으면 안 됩니다.

정보

열 유체로는 물 또는 물-에틸렌글리콜 혼합물만 허용됩니다. Huber 카탈로그에 수록된 지정 혼합비의 에틸렌글리콜을 권장합니다.

명칭	기준
열 유체: 물	
리터당 탄산 칼슘	≤ 1.5 mmol/l; 물 경도에 해당: ≤ 8.4 °dH(연수)
PH 농도	6.0 에서 8.5 사이
초순수, 증류	리터당 소다 0.1 g(Na ₂ CO ₃) 첨가
승인되지 않은 물	증류수, 탈이온수, 완전 탈염수, 염소 함유수, 철분 함유수, 암모니아 함유수, 오염수, 미처리 하천수, 해수
순환 유량(최소)	3 리터/분.
열 유체: 에틸렌글리콜이 없는 물	
사용	≥ +3 °C
열 유체: 물 에틸렌 글리콜 혼합물	
사용	< +3 °C
열 유체 구성	혼합물은 허용 최소 온도보다 10 K 적어야 합니다. 허용 온도 범위는 데이터 시트에서 확인하십시오. → 페이지 이하 57, 섹션 «부록».

3.3 테스트 계획 주의 사항

정보

올바른 작동에 유의하십시오. → 페이지 14, 섹션 «규정에 맞는 작동».

귀하의 애플리케이션이 초점입니다. 시스템 성능이 열전달, 온도, 열 유체의 점도, 용량 유동 및 유동 속도에 좌우된다는 점을 고려하시기 바랍니다.

- 전기 커넥터 치수가 충분한지 확인하십시오.
- 온도 조절 장치 설치 장소는 수랭식 냉각기가 있어도 신선한 공기가 충분히 있는 곳으로 선택해야 합니다.
- 유리 반응기 같은 압력에 민감한 장치들의 경우, 온도 조절 장치의 최대 공급 압력을 고려해야 합니다.
- 열 유체 회로에서 단면 감소나 차단을 방지해야 합니다. 설비의 압력 제한 관련 해당 조치를 취하십시오. 유리 장비의 데이터 시트 및 온도 조절 장치의 데이터 시트를 참조하십시오. → 시작 페이지 57, 섹션 «부록».
- 압력 제한 없는 온도 조절 장치에서 외부 바이패스의 필요한 이동을 검사합니다.
- 시스템 내 초과 압력 위험을 예방하기 위해, 끄기 전에는 열 유체를 항상 실내 온도로 조정해야 합니다. 이렇게 하면 온도 조절 장치나 애플리케이션에서 손상을 방지할 수 있습니다. 차단 밸브가 있는 경우는 이를 계속 열어 두어야 합니다(압력 균형).
- 사용하시는 열 유체는 최소 및 최대 작업 온도를 가능케할 뿐만 아니라 연소점, 비등점 및 점도 면에서도 적합하도록 선택하셔야 합니다. 뿐만 아니라 열 유체가 시스템 내부의 모든 재료에 내성을 가져야 합니다.
- 온도 조절 호스와 냉각수 호스가(필요 시) 꺾이지 않도록 해야 합니다. 해당 앵글 피스들을 사용하시고 큰 반경의 호스 커넥터를 설치하십시오. 최소 휨 반경은 사용하는 온도 조절 호스 데이터 시트에서 확인하실 수 있습니다.
- 선택한 호스 커넥터들은 열 유체, 작업 온도 및 허용 최대 압력을 견뎌야 합니다.
- 호스는 정기적으로 재료 피로(예: 균열, 누출)는 없는지 검사하십시오.
- 온도 조절 호스를 가능한 한 짧게 합니다
 - 온도 조절 호스 내경은 최소한 펌프 커넥터와 일치해야 합니다. 파이프 길이가 긴 경우 내경은 배관 내 압력 손실에 맞춰 더 커야 합니다.
 - 열 유체의 점도에 따라 감압이 달라지고, 특히 낮은 작동 온도에서 온도 조절 결과가 영향을 받습니다.
 - 지나치게 작은 커넥터와 밸브는 상당한 유동 저항을 일으킬 수 있습니다. 애플리케이션은 이에 따라 더 느리게 온도 조절됩니다.
- 원칙적으로 제조사에서 권장한 열 유체만 그리고 가용 온도 및 압력 범위에서만 사용합니다.
- 애플리케이션은 열 유체 비등 온도 가까이에서 온도 조절 시 온도 조절 장치와 대략 동일한 높이나 온도 조절 장치 밑에 있어야 합니다.

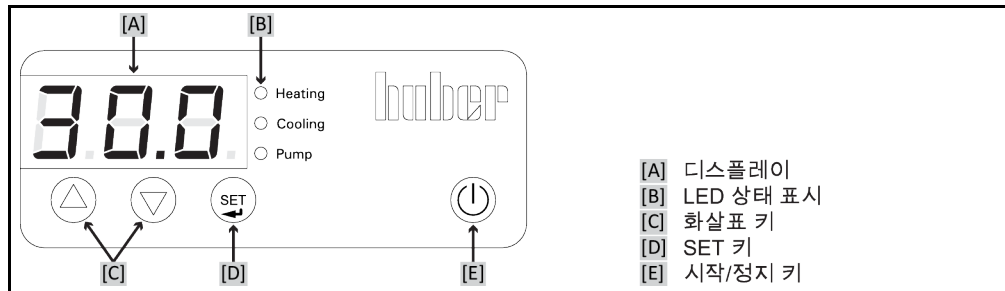
- 온도 조절 장치를 천천히, 조심스럽게 그리고 균일하게 채우십시오. 이 경우 보안경, 열과 화학 물질에 내성이 있는 보호 장갑 같은 개인 보호 장구를 착용하십시오.
- 필요한 모든 매개 변수를 채우고 설정한 후에는 온도 조절 회로를 환기시켜야 합니다. 이는 온도 조절 장치가 올바르게 작동하고 이에 따라 애플리케이션이 올바르게 작동하기 위한 조건입니다.

정보

수랭 온도 조절 장치용으로 완벽한 작동에 필요한 냉각수 온도와 필요한 차압은 → 시작 페이지 57, 섹션 «부록»에서 확인하십시오.

3.4 디스플레이 및 조절 장비

조작 패널:
디스플레이와 키



3.4.1 디스플레이

내부 온도값이 표시됩니다. 예를 들어 수조가 있는 온도 조절 장치의 경우 수조 온도 또는 냉각기의 경우 공급 온도입니다. 다른 키 조합을 사용하면 설정값, 메뉴 항목 또는 다른 설정도 표시됩니다.

3.4.2 LED 디스플레이 상태

이러한 LED 는 현재 작동 상태를 알려줍니다.

3.4.3 화살표 키

필요에 따라 이 키로 설정값을 (▲)(위로) 또는 (▼)(아래로) 변경하거나, 메뉴 항목을 선택하거나, 메뉴 항목을 변경합니다. 메뉴를 불러오는 데에도 <화살표 키> [C]가 필요합니다.

3.4.4 세트 키

<세트 키> [D]를 누르면 설정값 온도로 전환됩니다. 이를 통해 설정값 온도를 표시하고 변경할 수 있습니다. 또한 <세트 키> [D]를 통해 다양한 메뉴 항목의 경우에 항목도 표시합니다.

3.4.5 시작/중단 키

이 키는 온도 조절을 시작하거나 중단합니다.

3.5 메뉴 기능

온도 조절 장치는 메뉴 기능을 갖추고 있습니다.

메뉴 항목의 개요	메뉴 항목	디스플레이	설명
	ADR		기능 없음
	C40		자동 시작 기능
	PA		서비스 메뉴 Huber 서비스 인력 전용.
	--		

3.6 기능 예시

3.6.1 설정값 표시

방법

- <세트 키> [D]를 누르고 계십시오. 설정값이 표시됩니다.
- <세트 키> [D]에서 손을 떼십시오. 내부 온도가 다시 표시됩니다.

3.6.2 설정값 조정

방법

- <세트 키> [D]를 누르고 계십시오. 설정값이 표시됩니다.
- <화살표 키> [C]를 사용하여 원하는 설정값을 설정하십시오.
⊕ (위로) 이동하면 온도가 상승하고, ⊖ (아래)로 이동하면, 온도가 감소합니다.
- <세트 키> [D]에서 손을 떼십시오. 새로운 설정값이 설정되었습니다.

3.6.3 자동-시작 기능 변경

정전 이후에(혹은 온도 조절 장치가 켜졌을 때) 온도 조절이 되어야 하는 방법을 본 기능으로 확인할 수 있습니다.

자동-시작 기능 꺼짐

온도 조절은 온도 조절 장치의 전원을 켜 후 수동 입력을 통해 시작됩니다.

자동-시작 기능 켜짐

온도 조절 장치는 정전 발생 전과 동일한 상태로 전환됩니다. 예를 들어, 정전 발생 전: 온도 조절이 꺼졌습니다; 정전 발생 후: 온도 조절이 꺼졌습니다. 정전일 때 온도 조절이 활성 상태였다면, 정전 이후에 자동적으로 계속됩니다.

메뉴 항목 "C40"의 설정 자동 시작 기능	설정	디스플레이	설명
	0		자동 시작 기능이 켜졌습니다.
	1		자동 시작 기능이 꺼졌습니다.

방법

- <화살표 키들> [C] Ⓜ과 를 동시에 Ⓜ 3 초 넘게 누르십시오. 디스플레이가 온도 표시에서 첫 번째 메뉴 항목의 표시로 바뀝니다.
- 메뉴 항목 "C40"이 표시될 때까지 <화살표 키> [C] Ⓜ를 누르십시오.
- <세트 키> [D]를 누르고 계십시오.
- <세트 키> [D] 외에 <화살표 키> [C] Ⓜ와 Ⓜ를 동시에 누르십시오. 디스플레이가 "0"(자동 시작 기능 켜짐)에서 "(자동 시작 기능 꺼짐)로 바뀝니다. 원하는 설정이 끝나면 <세트 키> [D]에서 손을 떼십시오.
- <화살표 키들> [C] Ⓜ과 를(을) 동시에 Ⓜ 1 초 넘게 누르십시오. 또는 <세트 키> [D]에서 손을 떼 후 몇 초간 기다리십시오. 선택한 기능이 저장되고 메뉴가 종료됩니다. 디스플레이에 온도 표시가 다시 표시됩니다.

4 설정 모드

4.1 설정 모드

! 주의

작동 중에 온도 조절 장치 이동
하우징 파트/새는 열 유체로 인한 심각한 화상/동상
➢ 사용 중인 온도 조절 장치를 이동하면 안 됩니다.

4.1.1 온도 조절 장치 켜기

방법

- 온도 조절 장치를 <전원 스위치> [37]로 켜십시오.
순환과 온도 조절은 비활성화되었습니다.

4.1.2 온도 조절 장치 끄기

방법

- 열 유체를 실내 온도에 맞춥니다.
- 온도 조절을 멈춥니다.
- 온도 조절 장치를 <메인 스위치> [37]로 끄십시오.

4.1.3 과열 보호(ÜT) 켜기

! 위험

과열 보호가 사용 열 유체의 초점보다 높게 설정됨
화재 사망 위험

- 과열 보호는 사용 열 유체에 정확히 설정해 두어야 합니다.
- 무조건 열 유체의 안전 데이터 시트에 유의해 주십시오.
- 과열 보호의 비활성화 값을 열 유체 초점보다 최소 25 K 밑으로 설정하십시오.

정보

과열 보호 기능이 올바르게 설정된 경우 이용 가능한 작업 온도 범위가 더 작을 수 있습니다.
허용 오차에 따라 온도가 작동 온도 상한에 도달하면 과열 보호 기능이 발동될 수 있습니다.

4.1.3.1 과열 보호에 관한 일반 정보

온도 조절 장치
전위차계
보기

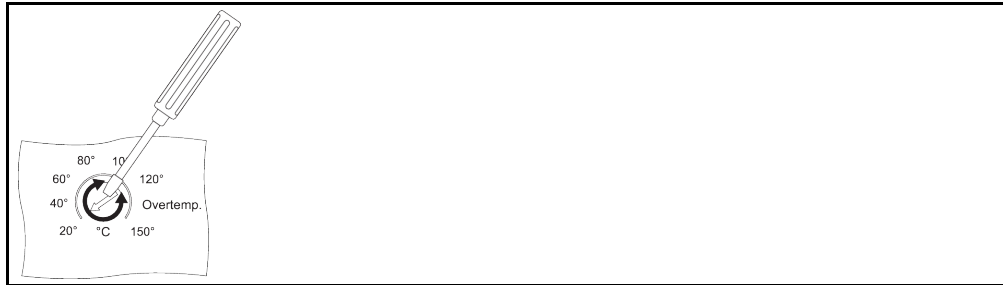


과열 보호는 히터가 있는 온도 조절 장치에만 설치되어 있습니다. 흐름 온도 관찰은 설비
안전에 도움이 됩니다. 흐름 온도는 설비를 열 유체로 채우신 직후에 설정됩니다.

납땜 시 과열 보호 비활성화 값은 40 °C에 설정되어 있습니다. 방금 채워 넣은 열 유체 온도가
과열 보호의 설정 비활성화 값보다 높은 경우, 온도 조절 장치 전원을 켤 때 이미 경보가
발동됩니다. 과열 보호를 자신이 사용하는 열 유체에 맞추십시오. 유의 사항: 인쇄된 눈금은
최대 - 25 K 만큼 설정 비활성화 값과 차이가 날 수 있습니다.

4.1.3.2 과열 보호 설정

비활성화 값
설정



정보

과열 보호의 비활성화 값 설정에는 스크루 드라이버(플랫 슬롯 1.0x5.5)가 필요합니다.

방법

- 스크루 드라이버의 도움으로 전위차계의 비활성화 값을 설정하십시오. 본 비활성화 값은 사용 열 유체에 적합하게 설정해야 합니다. 온도 조절 장치는 이를 위해 켜둘 필요는 없습니다.

4.1.4 과열 보호의 기능 테스트

⚠ 위험

과열 보호(ÜT)가 작동하지 않습니다

화재 사망 위험

- 매월 테스트하고 열 유체 교체 후 매번 완벽한 기능을 확보하기 위해 장비의 반응을 테스트하십시오.

알아두기

온도 조절 장치의 그 다음의 단계는 지속적인 사용자의 감시 없이 이루어집니다
온도 조절 장치 근처의 재산 피해

- 다음과 같은 활동은 온도 조절 장치와 장치의 지속적인 관찰 환경에서만 진행해야 합니다!

정보

과열 보호는 히터가 있는 온도 조절 장치에만 설치되어 있습니다. 과열 보호의 기능을 점검하려면 치수가 충분히 큰 스크루 드라이버가 필요합니다.

과열 보호의 정확한 기능을 테스트하십시오:

방법

- 전위차계에 설정된 과열 보호 장치의 비활성화 값을 메모하십시오.
- 온도 조절 장치를 켜십시오.
- 설정값(실내 온도)을 입력하십시오. → 페이지 35, 섹션 «설정값 조정».
- <시작/정지 키> [T]를 눌러 온도 조절을 시작하십시오.
- 스크루 드라이버의 도움으로 전위차계의 새로운 비활성화 값을 설정하십시오. 본 비활성화 값은 표시된 내부 온도 밀이어야 합니다. 과열 보호 장치가 발동됩니다.
- 온도 조절 장치를 끄십시오.
- 스크루 드라이버의 도움으로 전위차계의 비활성화 값을 다시 원래의 값으로 변경하십시오.

정보

온도 과열 보호 장치가 작동하지 않으면, 온도 조절 장치를 즉시 정지하십시오. 즉시 고객 지원 센터에 연락하십시오. → 페이지 55, 섹션 »연락 정보«. 온도 조절 장치를 다시 가동하지 마십시오.

4.2 충전, 환기 그리고 배출

결선도에 유의하십시오. → 페이지부터 57, 섹션 «부록».

! 주의

극심한 열기/냉기 표면, 연결과 열 유체
사지 화상/동상

- 작동 모드에 따라 표면, 연결 장치, 온도 조절 열 유체가 극심한 열기나 냉기를 띌 수 있습니다.
- 표면, 연결 장치, 열 유체와 직접적인 접촉을 피해야 합니다!
- 개인 보호 장비(예: 내온도성 보안경, 안전 장갑, 안전화)를 사용하시길 바랍니다.

알아두기

열 유체 회로가 활성화된 순환에서 차단 밸브로 차단되는 경우
온도 조절 장치에 장착된 순환 펌프의 물적 손상

- 활성 순환 중에는 열 유체 회로를 차단 밸브로 차단하지 않습니다.
- 순환을 중지하기 전에 열 유체를 실내 온도에서 템퍼링하십시오.

정보

온도 조절 장치가 모두 연결부/배출관의 동일 결합을 구비하고 있지는 않습니다. 온도 조절 장치에서 연결부/배출관을 사용할 수 없는 경우, 이 단계를 건너뛰십시오.

4.2.1 외부에서 닫히는 장치 충전과 환기

! 주의

사용되는 열 유체의 안전 데이터 시트의 미준수 위반

- 눈, 피부, 기도에 상해를 끼칠 수 있는 위험이 있습니다.
- 사용되는 열 유체의 안전 데이터 시트는 반드시 사용 전에 읽어야 하며, 내용을 따라야 합니다.
- 지역 법규와 작동 설명서를 주의하시길 바랍니다.
- 개인 보호 장비(예: 내온도성 보호 장갑, 보안경, 안전화)를 사용하시길 바랍니다.
- 작업장에 있는 흙이나 오염으로 인해 미끄러질 수 있는 위험이 있습니다. 작업장을 청소하고, 열 유체와 보조제의 적절한 폐기에 유의하십시오. → 페이지 15, 섹션 «도구와 소모품의 전문적 폐기».

알아두기

온도 조절 장치 내부로 넘쳐 들어가는 열 유체 물적 손상

- 온도 조절 장치를 즉시 끕니다.
- 온도 조절 장치를 전원 포트에서 분리합니다.
- 온도 조절 장치는 Huber 에서 교육받은 직원에게만 점검 및 청소를 의뢰하십시오. 적절한 폐기에 유의하십시오. → 페이지 15, 섹션 «도구와 소모품의 전문적 폐기»에서 확인하십시오.

알아두기

반자동 환기
온도 조절 장치의 물적 손상

- 시스템에 열 유체가 지나치게 적은 경우, 감압 허용 시간의 증가에 따라 펌프에 손상이 일어날 수 있습니다.
- 계속 <액면계> [23]의 열 유체 레벨을 관찰하십시오. 환기 단계에서 <액면계> [23]의 열 유체 레벨이 최소 표시 아래로 떨어지지 않도록 열 유체를 다시 채우십시오.

정보

<팽창 탱크> [18]의 용량이 작동 중 팽창 볼륨을 수용할 수 있는지 계산하십시오. 이를 위해서 다음 수량을 기준으로 삼으십시오: [온도 조절 장치의 최소 충전량] + [온도 조절 호스의 내용물] + [애플리케이션의 재킷 부피] + [10%/100 K].

정보

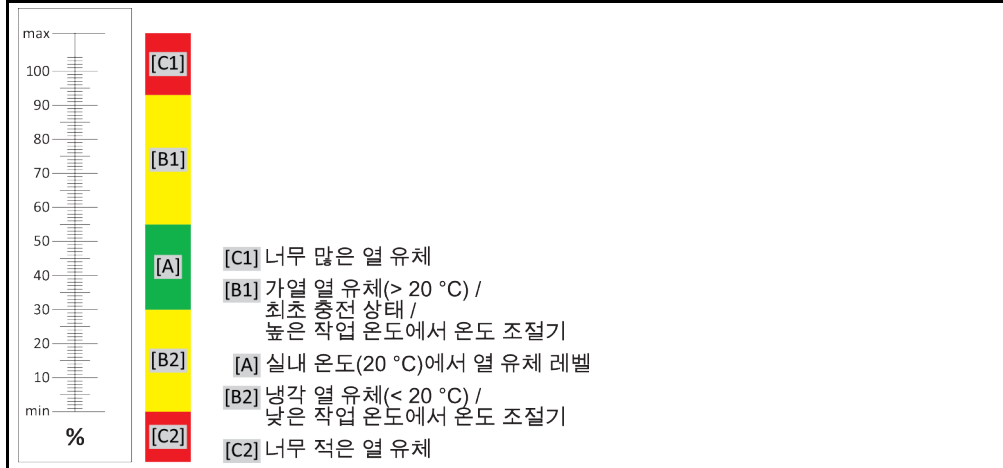
닫힌 외부 장치(반응기)에서 수준 반응기에서 유체 수준이 펌프가 작동되고 펌프가 작동 될 때 지속적으로 남아있다면, 장치가 환기되는 것으로 여겨집니다.

정보

특히, 시운전 시 및 열 유체 교체 후에는 환기를 시켜야 합니다. 그렇게 해야만 문제 없이 작동됩니다.

작업하려는 작업 온도 범위에 따른 열 유체의 부피 확장에 유의하십시오. "최저" 작업 온도에서는 "최소" 표시 아래로 떨어지지 않아야 합니다. "최고" 작업 온도에서는 <팽창 용기> [18]에서 넘침이 없어야 합니다. 과잉 충전 시 과잉 열 유체를 배출시키십시오. → 페이지 41, 섹션 «외부에서 닫히는 장치 비우기».

<액면계> [23] 충전 레벨



- 채우는 동안 용기, 깔때기 및 기타 보조 도구의 접지 등 필요한 조치 준수.
- 가능한 한 낮은 높이에서 채우십시오.

방법

- <바이패스 밸브> [62]가 있는 온도 조절 장치: <바이패스 밸브> [62]가 완전히 열려 있는지 점검하십시오.
- <바이패스 밸브> [12]가 있는 온도 조절 장치: 호스가 <일류관> [12]에 장착되었는지 점검하십시오. 호스의 다른 끝은 적합한 수집 용기에 꽂혀 있어야 합니다. 온도 조절 장치 범람 시 여기로 초과 열 유체가 빠져나옵니다. 호스 및 수집 용기는 열 유체 및 온도와 호환되어야 합니다.
- <액면계> [23]가 있는 온도 조절 장치: <액면계 커버> [24]를 여십시오. 이렇게 하면 <액면계> [23]에 에어 쿠션이 형성되는 것을 방지할 수 있으므로 충전이 용이합니다. 충전 시, <액면계> [23]에서 열 유체가 새어 나오면 안 됩니다!
- 손으로 <주입구> [17]를 여십시오.
- 알맞은 열 유체를 충전 부대 용품(깔때기 및/또는 비커)을 사용하여 조심스럽게 <주입구> [17]에 넣으십시오. 열 유체는 온도 조절 장치로 흘러 들어가고 호스 연결을 통해 외부 애플리케이션으로 흐릅니다. <액면계> [23]에서 충전 레벨을 확인하실 수 있습니다(초기 충전 레벨 50~70%). 충전 부대 용품 청소 시 전문적 폐기에 유의하십시오. → 페이지 15, 섹션 «도구와 소모품의 전문적 폐기».
- <액면계> [23]가 있는 온도 조절 장치: <액면계 커버> [24]를 닫으십시오.
- 온도 조절 장치를 켜십시오.
- 설정값을 20 °C에 맞추십시오. → 페이지 35, 섹션 «설정값 조정».
- <시작/정지 키> [E]를 눌러 순환을 시작하십시오.
- 필요한 경우 열 유체를 재충전하십시오. 이를 위해 <액면계> [23]에서 충전 레벨을 관찰하십시오(50% 아래로 떨어지면 안 됩니다). 온도 조절 장치가 충분히 충전되면, 충전/환기 과정이 완료됩니다.
- <바이패스 밸브> [62]가 있는 온도 조절 장치: 열 유체 회로 내 압력을 사용 외부 애플리케이션에 설정하십시오. 이때 <바이패스 밸브> [62] 및 압력 표시기를 사용하십시오.
- <시작/정지 키> [E]를 눌러 순환을 중단하십시오.
- 온도 조절 장치를 끄십시오.
- <바이패스 밸브> [12]가 있는 온도 조절 장치: 수집 용기의 충전 레벨을 확인하십시오. 필요한 경우 용기를 비우고 내용물을 전문적으로 폐기하십시오.
- 손으로 <주입구> [17]를 닫으십시오.
- 온도 조절 장치가 이제 충전되었습니다.

4.2.2 외부에서 달히는 장치 비우기

! 주의

뜨겁거나 매우 차가운 열 유체

팔다리의 심한 화상/동상

- 비우기 전에, 열 유체가 실온(20 °C)으로 조절되도록 해야 합니다.
- 이 온도에서 열 유체가 지나치게 점성이 높아 배출이 어려운 경우: 점성이 배출에 충분해질 때까지 몇 분간 열 유체를 온도 조절합니다. 배출구가 열린 채로 열 유체를 온도 조절하면 절대 안 됩니다.
- 20 °C 가 넘는 온도에서 열 유체를 비우는 동안 화상의 위험이 있습니다.
- 배출되는 동안에 개인 보호 장구를 사용하십시오.
- 적절한 배출 호스와 수집 용기만을 사용하여 배출 작업을 실시하십시오. 호스와 용기는 열 유체 및 열 유체 온도와 맞아야 합니다.

4.2.2.1 열 유체 회로 비우기

방법

- <배출관> [8]에서 열 유체를 수집할 수 있는 다른 적절한 용기(예: 통)를 준비해 두십시오.
- <액면계> [23]가 있는 온도 조절 장치: 널 스크루를 <배출관> [8]에서 제거하십시오. 널 스크루를 열자마자, 외부 애플리케이션의 열 유체가 온도 조절 장치를 통해 용기로 흘러들어갑니다.
- <배출관> [8]에서 열 유체가 더 이상 흘러나오지 않을 때까지 기다리십시오.
- <액면계> [23]가 있는 온도 조절 장치:<잔여물 배출관> [10]에서 열 유체를 수집할 수 있는 다른 적절한 용기(예: 통)를 준비해 두십시오.
- <액면계> [23]가 있는 온도 조절 장치:<잔여물 배출관> [10]에서 널 스크루를 제거하십시오. 널 스크루를 풀자마자, 온도 조절 장치에서 잔여 열 유체가 용기로 흘러 들어갑니다.
- 온도 조절 장치와 외부 애플리케이션이 비워질 때까지 기다리십시오.
- 외부 애플리케이션을 비우십시오. 배출 관련 설명은 애플리케이션과 함께 받은 문서에서 확인하십시오.

4.2.2.2 애플리케이션 분리/장착

방법

방법 계속 «열 유체 회로 비우기»

- 외부 애플리케이션을 <순환 출력> [1]연결부에서 분리하십시오.
- 외부 애플리케이션을 <순환 입구> [2] 연결부에서 분리하십시오. 온도 조절 장치를 잠시 열어 두어 건조시키십시오(밀봉 캡 없이 그리고 배출관을 열고).
- <순환 출구> [1]연결부와 외부 애플리케이션을 연결하십시오.
- <순환 입구> [2]연결부와 외부 애플리케이션을 연결하십시오.

4.2.2.3 밸브 닫기

방법

방법 계속 «애플리케이션 분리/장착»

- <액면계> [23]가 있는 온도 조절 장치: 널 스크루를 <배출관> [8]과 <잔여물 배출관> [10]에 끼우십시오.
- 열 유체 수집 용기를 제거하십시오. 열 유체를 다시 사용할 수 있는지 확인하십시오. 전문적 폐기에 유의하십시오. →페이지 15, 섹션 «도구와 소모품의 전문적 폐기».

5 일반적인 작동

5.1 자동 모드

⚠ 주의

극심한 열기/냉기 표면, 연결과 열 유체

사지 화상/동상

- 작동 모드에 따라 표면, 연결 장치, 온도 조절 열 유체가 극심한 열기나 냉기를 띠 수 있습니다.
- 표면, 연결 장치, 열 유체와 직접적인 접촉을 피해야 합니다!
- 개인 보호 장비(예: 내온도성 보안경, 안전 장갑, 안전화)를 사용하시길 바랍니다.

알아두기

열 유체 회로가 활성화된 순환에서 차단 밸브로 차단되는 경우

온도 조절 장치에 장착된 순환 펌프의 물적 손상

- 활성 순환 중에는 열 유체 회로를 차단 밸브로 차단하지 않습니다.
- 순환을 중지하기 전에 열 유체를 실내 온도에서 템퍼링하십시오.

5.1.1 온도 조절

5.1.1.1 온도 조절 시작

충전과 완전한 공기 제거 이후에 온도 조절 장치가 시작될 수 있습니다.

방법

- 전원이 켜진 온도 조절 장치에서 온도 조절/순환이 정지된 경우 <시작/정지 키> [E]를 누르십시오.
온도 조절이 시작됩니다.

5.1.1.2 온도 조절 종료

알아두기

온도 조절 장치를 끄 때, 열 유체 온도는 실온보다 더 높거나 낮습니다

온도 조절 장치와 유리 장비/장치의 물적 손상

- 온도 조절 장치를 사용하여 열 유체를 실온으로 변경합니다.
- 열 유체 회로에 있는 차단 밸브를 닫지 마시길 바랍니다.

온도 조절은 언제든지 종료할 수 있습니다. 온도 조절 및 순환은 그 직후에 꺼집니다.

방법

- 전원이 켜진 온도 조절 장치에서 온도 조절/순환이 진행되는 경우 <시작/정지 키> [E]를 누르십시오.
온도 조절이 정지됩니다.







6 인터페이스

알아두기	<p>작동하는 동안에 온도 조절 장치의 인터페이스와 연결 인터페이스 피해</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 온도 조절 장치 인터페이스 작동 중에 장치를 연결할 때, 인터페이스가 파손될 수 있습니다. ➢ 연결 전에 온도 조절 장치 및 연결할 장치는 꺼져 있도록 유의하십시오.
알아두기	<p>사용되는 인터페이스의 설명을 따르지 않습니다</p> <p>물적 손상</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 오직 사용되는 인터페이스의 사양에 맞는 부품만을 연결해야 합니다.
정보	<p>인터페이스 사용 시 일반 규격의 인터페이스 사양을 준수해야 합니다. 인터페이스의 정확한 위치는 결선도에서 확인하실 수 있습니다. → 시작 페이지 57, 섹션 «부록»에서 확인하십시오.</p>
정보	<p>PB 명령의 사용법은 "데이터 통신" 매뉴얼에 설명되어 있습니다. 이 매뉴얼은 www.huber-online.com 에서 다운로드할 수 있습니다.</p>
정보	<p>인터페이스에 대한 정보는 "인터페이스" 매뉴얼에서 확인하실 수 있습니다. 이 매뉴얼은 www.huber-online.com 에서 다운로드할 수 있습니다.</p>

7 정비/유지 보수

7.1 오류 시 디스플레이

고장 시에 장치는 경보나 경고 메시지를 디스플레이에 표시합니다.

디스플레이	원인	영향, 처리
<p>메시지의 개요</p>  <p>온도값의 깜박이는 표시</p>	<p>경고: 온도 초과 또는 미달.</p>	<p>조절 장치를 다시 맞춥니다. 설정값 한계값: Minichiller(Plus) - 5 K/+ 2 K Minichiller w (Plus) - 5 K/+ 2 K Minichiller H (Plus) ± 5 K 모든 Unichiller ± 5 K 예외: Unichiller 003 - 5 K/+ 2 K Unichiller 012 ± 2 K</p>
 <p>F1 - 깜박임</p>	<p>센서 오류 1 파손 또는 단락</p>	<p>제어 기능이 비활성 상태입니다. (펌프 꺼짐, 컴프레서 꺼짐, 히터 꺼짐) 센서를 확인하십시오.</p>
 <p>E1 - 깜박임</p>	<p>입력 E1 이 오류를 보고합니다. a) 활성화 신호 없음, 레벨 알람 b) 히터가 있는 온도 조절 장치에 유효: 내부 온도는 과열 보호 장치의 설정된 값보다 높습니다. 과열 보호 장치가 작동되었습니다.</p>	<p>a) 제어 기능이 비활성 상태입니다. (펌프 끄기, 컴프레서 끄기, 히터 끄기) 레벨을 확인합니다. 레벨이 정상인 경우에만, 재시작 가능. b) 과열 보호 값은 내부 온도 및/또는 설정값보다 높아야 합니다. 설정값을 설정 과열 보호값보다 높게 설정하지 않습니다.</p>
 <p>E2 - 깜박임</p>	<p>입력 E1 이 오류를 보고합니다. a) 펌프가 작동 중이고 유량이 없거나 펌프가 작동 중이고 수압이 없습니다. b) 히터가 있는 온도 조절 장치에 유효: 내부 온도는 과열 보호 장치의 설정된 값보다 높습니다. 과열 보호 장치가 작동되었습니다.</p>	<p>a) 제어 기능이 비활성 상태입니다. (펌프 끄기, 컴프레서 끄기, 히터 끄기) 전원 공급을 중단해야만 재시작 가능. b) 과열 보호 값은 내부 온도 및/또는 설정값보다 높아야 합니다. 설정값을 설정 과열 보호값보다 높게 설정하지 않습니다.</p>
 <p>E3 - 깜박임</p>	<p>제어 기능이 꺼져 있지만 입력 E1 은 유량을 보고합니다</p>	<p>제어가 비활성 상태입니다. (펌프 끄기, 컴프레서 끄기, 난방 끄기) 입력 E1 이 대기 상태에서 다시 열리면, 오류가 자동으로 수정됩니다.</p>
 <p>EP - 깜박임</p>	<p>파라미터 메모리의 데이터 손실</p>	<p>제어 기능이 비활성 상태입니다. (펌프 끄기, 컴프레서 끄기, 난방 끄기)</p>

정보

오류 메시지가 출력되는 동안 오류 메시지와 실제값이 번갈아 표시됩니다.

7.2 정비

⚠ 위험

온도 조절 장치가 작동되는 동안의 청소/정비
감전사 위험

- 작동 중인 온도 조절 장치를 중지하십시오.
- 온도 조절 장치를 끄십시오.
- 또한 전원 공급 장치에서 온도 조절 장치의 연결을 해제하십시오.

알아두기

이 사용 설명서에 명시되지 않은 정비 작업을 실행할 경우
온도 조절 장치의 물적 손상

- 이 사용 설명서에 명시되지 않은 정비 작업을 수행할 경우, Huber 회사에 연락하시기 바랍니다.
- 사용 설명서에서 명시되지 않은 정비 작업은 Huber 에서 훈련된 직원에 의해서만 이뤄질 수 있습니다.
- 안전 관련 부품은 대등한 부품으로만 교환해야 합니다. 각각의 부품에 지정된 안전값을 준수해야 합니다.

7.2.1 기능과 시각적인 조사 간격

조절 간격	냉각*	설명	정비 간격	의견	책임자
LW		호스 및 호스 커넥터 육안 검사	온도 조절 장치 켜기 전	온도 조절 장치를 켜기 전에 새는 호스 및 호스 커넥터들을 교체합니다. → 페이지 46, 섹션 «온도 조절이나 냉각수 호스 교체».	관리자 및 / 또는 작업 인력
LW		<일류관> [12](있는 경우)에서 수집 용기 충전 레벨 확인	온도 조절 장치 켜기 전	수집 용기의 충전 레벨을 확인하고 필요한 경우 비웁니다. 열 유체의 적절한 폐기에 유의하십시오. → 페이지 15, 섹션 «도구와 소모품의 전문적 폐기».	관리자 및 / 또는 작업 인력
LW		F 가스 규정에 따른 검사	F 가스 규정 의거	→ 페이지 18, 섹션 «불화계 온실 가스/냉매를 갖춘 온도 조절 장치».	운영자
LW		전원 케이블 검사	온도 조절 장치를 켜기 전이나 위치를 변경할 때	전원 케이블 손상 시 온도 조절 장치를 작동시키지 않습니다.	전기 기사(BGV A3)
L		천공 그리드 청소	필요하면	젓은 천으로 온도 조절 장치의 천공 그리드를 청소하십시오	운영자
LW		열 유체 검사	필요하면	-	관리자 및 / 또는 작업 인력
LW		기계 씰 점검	매달	→ 페이지 51, 섹션 «메커니컬 씰 확인».	관리자 및 / 또는 작업 인력
L		콘덴서 핀 체크	필요에 따라, 늦어도 3 개월 뒤	→ 페이지 46, 섹션 «콘덴서 핀 청소».	관리자 및 / 또는 작업 인력
W		필터 스크린(스트레이너) 검사	필요에 따라, 늦어도 3 개월 뒤	→ 페이지 47, 섹션 «필터 스크린/스트레이너 청소».	관리자 및 / 또는 작업 인력
LW		과열 보호 장치(ÜT) - 기능 검사	매월 또는 열 유체 변경 후	→ 페이지 37, 섹션 «과열 보호(ÜT) 켜기».	관리자 및 / 또는 작업 인력
LW		온도 조절 장치의 손상 및 안정성 검사	12 개월마다 또는 위치 변경 이후	-	관리자 및 / 또는 작업 인력

냉각*	설명	정비 간격	의견	책임자
W	냉각수 수질 체크	12 개월마다	필요 시 냉각수 회로 석회 제거. 수질 관련 기록: www.huber-online.com	관리자 및 / 또는 작업 인력
L/W	안전 관련 전기 및 전기 기계 부품 교환	20 년	반드시 공인 작업자(예: Huber 사 서비스 기술자)에게 교체 작업을 맡깁니다. 고객 지원 센터에 연락하시길 바랍니다. → 페이지 55, 섹션 «연락 정보».	운영자

*L = 공랭, W = 수랭, U = Unistate 에만 해당

7.2.2 온도 조절이나 냉각수 호스 교체

결함 있는 온도 조절 및/또는 냉각수 호스를 온도 조절 장치를 켜기 전에 교체하십시오.

7.2.2.1 온도 조절 호스 교체

방법

- 온도 조절 장치를 비우십시오. → 페이지 41, 섹션 «외부에서 닫히는 장치 비우기».
- 결함이 있는 온도 조절 튜브 교체. 적절한 폐기에 유의하십시오. → 페이지 15, 섹션 «도구와 소모품의 전문적 폐기».
- 다시 외부 애플리케이터를 연결하십시오. → 페이지 30, 섹션 «외부 폐쇄형 애플리케이터에 연결하기»에서 확인하십시오.
- 열 유체로 온도 조절 장치를 충전하십시오. → 페이지 39, 섹션 «외부에서 닫히는 장치 충전과 환기»에서 확인하십시오.
- 온도 조절 장치를 환기하십시오. → 페이지 39, 섹션 «외부에서 닫히는 장치 충전과 환기»에서 확인하십시오.
- 온도 조절 장치를 다시 정상 모드로 전환하십시오.

7.2.2.2 냉각수 호스 교체

방법

- 냉각수를 내보내십시오. → 페이지 53, 섹션 «냉각수 배출».
- 결함이 있는 냉각 호스를 교체하십시오. 폐기 시 올바르게 폐기하여 주십시오. → 페이지 15, 섹션 «도구와 소모품의 전문적 폐기».
- 건물 측의 냉각수 공급으로 다시 온도 제어를 연결합니다. → 페이지 27, 섹션 «수랭을 갖춘 온도 조절 장치».
- 온도 제어 장치를 일반 작동으로 설정합니다.

7.2.3 콘덴서 핀 청소

공랭식 온도 조절 장치에만 유효

⚠ 주의

손으로 청소

콘덴서 핀에서 벨 위험

- 청소 작업 중 베지 않는 적합한 장갑을 끼십시오.
- 주변 조건에 따라 진공 청소기 및/또는 핸드 브러시/브러시 같은 적합한 청소 도구를 사용하십시오. 청소 중 지역 규정을 지키십시오. 청정실에서 콘덴서 핀은 예를 들어 미세 먼지 필터 없는 진공 청소기와 브러시로 청소하지 마십시오.

알아두기

뾰족하거나 날카로운 도구로 하는 청소

콘덴서 핀의 물적 손상

- 콘덴서 핀은 적합한 청소 도구로 청소하십시오.

정보

온도 제어 장치에 대해 원활한 환기를 (폐열 제거, 신선한 공기 공급) 확보하고, 공랭을 위해 벽에서 일정한 간격을 두어야 합니다. → 페이지 20, 섹션 »냉각 버전 도시« 및 → 페이지 23, 섹션 »환경 조건«.
때때로 콘덴서 핀의 오물(먼지)을 제거해야 합니다. 그래야 온도 제어 장치가 최대의 냉각 성능을 발휘할 수 있습니다.

환기 그릴 위치를 확인하시면, 보통 환기 그릴은 전면에 있습니다. 몇몇 온도 조절 장치의 경우 환기 그릴이 온도 조절 장치의 측면, 뒷면 및 바닥(테이블 장치)에 있습니다.

방법

앞면/뒷면이나 측면의 환기 그릴

- 온도 조절 장치를 끄십시오.
- 전원 공급 장치에서 온도 조절 장치의 연결을 해제하십시오.
- 콘덴서 핀에 자유롭게 접근하려면 환기 그릴을 제거하십시오.
- 콘덴서 핀은 적합한 청소 도구로 청소하십시오. 청소 도구 선택 시 주변 조건과 지역 규정에 유의하십시오.
- 콘덴서 핀이 손상되거나 변형되지 않도록 유의하십시오. 그렇지 않으면 공기 흐름에 문제가 생깁니다.
- 청소 후에 다시 환기 그릴을 부착하십시오.
- 전원 공급 장치와 온도 조절 장치를 연결하십시오.
- 온도 조절 장치를 켜십시오.

방법

바닥의 환기 그릴(테이블 장치)

알아두기

온도 조절 장치가 채워진 상태에서 바닥의 콘덴서 핀 청소

열 유체의 온도 조절 장치 침투에 따른 물적 손상

- 온도 조절 장치 바닥의 콘덴서 핀 청소에 앞서, 온도 조절 장치를 비웁니다.

- 온도 조절 장치를 끄십시오.
- 전원 공급 장치에서 온도 조절 장치의 연결을 해제하십시오.
- 온도 조절 장치에서 열 유체를 비우십시오. → 페이지 41, 섹션 »외부에서 닫히는 장치 비우기«.
- 콘덴서 핀 앞의 환기 그릴(있는 경우)을 제거하려면 온도 조절 장치를 기울이십시오.
- 콘덴서 핀은 적합한 청소 도구로 청소하십시오. 청소 도구 선택 시 주변 조건과 지역 규정에 유의하십시오.
- 콘덴서 핀이 손상되거나 변형되지 않도록 유의하십시오. 그렇지 않으면 공기 흐름에 문제가 생깁니다.
- 청소 후에 다시 환기 그릴을 부착하십시오.
- 전원 공급 장치와 온도 조절 장치를 연결하십시오.
- 열 유체로 다시 온도 조절 장치를 충전하십시오. → 페이지 39, 섹션 »외부에서 닫히는 장치 충전과 환기«.

7.2.4 필터 스크린/스트레이너 청소

수랭식 온도 조절 장치에만 유효

알아두기

건물 측 차단 밸브가 닫히지 않았습니다

공간 범람에 따른 물적 손상

- 냉각수 왕복관에서 건물 측 차단 밸브를 닫으십시오.
- 수집 용기를 각각 냉각수 공급 장치 [13], [14] 및 [15](있는 경우) 밑에 두십시오.

정보	수질에 따라 <냉각수 입구> [13]의 정기적 점검과 청소가 필요합니다. "냉각수 회로 비우기", "냉각수 입구 분리", "필터 스크린/스트레이너 청소", "냉각수 입구 장착" 단계를 차례로 수행합니다.
정보	서비스 관련 교육도 기꺼이 제공해 드립니다. 고객 지원팀에 문의하십시오 → 페이지 55, 섹션 «연락 정보»에서 확인하십시오.

7.2.4.1 냉각수 회로 비우기

방법

- 온도 조절 장치를 끄십시오.
- 전원 공급 장치에서 온도 조절 장치의 연결을 해제하십시오.
- 냉각수 왕복관에서 건물 측 차단 밸브를 닫으십시오.
- 수집 용기를 각각 냉각수 공급 장치 [13], [14] 및 [15](있는 경우) 밑에 두십시오.
- <냉각수 배출관> [15](있는 경우)을 여십시오. 온도 조절 장치가 <냉각수 배출관> [15]을 구비하지 않은 경우: <냉각수 입구> [13]를 여십시오. 냉각수가 배출되기 시작합니다. 냉각수를 무조건 완전히 배출시킵니다.
- <냉각수 출구> [14]를 여십시오. 냉각수가 배출되기 시작합니다. 냉각수를 무조건 완전히 배출시킵니다.
- 배출 후 냉각수 공급 장치 [13], [14] 및 [15](있는 경우) 밑의 수집 용기를 제거하십시오. 수집 용기의 내용물을 전문적으로 배출하십시오. → 페이지 15, 섹션 «도구와 소모품의 전문적 폐기».

7.2.4.2 냉각수 공급 장치 분리

방법

- <냉각수 입구> [13]를 건물 측 냉각수 공급 장치에서 분리하십시오.
- <냉각수 출구> [14]를 건물 측 냉각수 공급 장치에서 분리하십시오.
- <냉각수 배출관> [15](있는 경우)을 닫으십시오.

7.2.4.3 필터 스크린/스트레이너 청소

- 테이블 모델: 모자 체를 <냉각수 입구> [13]에서 제거하십시오.
- 스탠드 모델: 냉각수 공급 장치 [13], [14] 및 [15](있는 경우) 부위의 클래딩을 제거하십시오. <냉각수 입구> [13] 바로 뒤에 스트레이너가 있습니다.
 - 조심스럽게 커버(육각)를 벗기십시오.
 - 그 아래에 있는 금속 체를 제거하십시오.
- 흐르는 물로 모자 체/금속 체를 세척하십시오.
- 세척 후 모자 체/금속 체를 다시 장착하십시오.
- 스탠드 모델: 조심스럽게 커버(육각)를 부착하고 냉각수 공급 장치 [13], [14] 및 [15](있는 경우) 부위에 클래딩을 설치하십시오.

7.2.4.4 냉각수 공급 장치 장착

- <냉각수 입구> [13]를 건물 측 냉각수 공급 장치와 연결하십시오.
- <냉각수 출구> [14]를 건물 측 냉각수 역류관과 연결하십시오.
- 연결 장치가 단단히 밀폐되어 있는지 점검하시기 바랍니다.
- 냉각수 왕복관에서 고객 측 차단 밸브를 여십시오.

7.3 열 유체 – 확인, 변경 그리고 순환 청소

절선도에 유의하십시오. → 페이지부터 57, 섹션 «부록».

! 주의

극심한 열기/냉기 표면, 연결과 열 유체
사지 화상/동상
 > 작동 모드에 따라 표면, 연결 장치, 온도 조절 열 유체가 극심한 열기나 냉기를 띌 수 있습니다.
 > 표면, 연결 장치, 열 유체와 직접적인 접촉을 피해야 합니다!
 > 개인 보호 장비(예: 내온도성 보안경, 안전 장갑, 안전화)를 사용하시길 바랍니다.

알아두기

열 유체 회로가 활성화된 순환에서 차단 밸브로 차단되는 경우
온도 조절 장치에 장착된 순환 펌프의 물적 손상
 > 활성 순환 중에는 열 유체 회로를 차단 밸브로 차단하지 않습니다.
 > 순환을 중지하기 전에 열 유체를 실내 온도에서 템퍼링하십시오.

7.3.1 열 유체 변경

알아두기

열 유체 회로에서 다양한 유형의 열 유체가 섞이게 되면
물적 손상
 > 다양한 유형의 열 유체를 혼합하지 마시길 바랍니다(예를 들어, 미네랄 오일, 실리콘 오일, 합성 오일, 물 등).
 > 열 유체 종류를 다른 것으로 변경할 때 열 유체 회로를 반드시 세척해야 합니다. 열 유체 사이클에 기존에 사용된 열 유체의 잔여물이 남아 있으면 안 됩니다.

7.3.1.1 외부에서 닫히는 장치

열 유체 교체에 유의하십시오: → 페이지 39, 섹션 »외부에서 닫히는 장치 충전과 환기«. 본 섹션에 비우기와 충전에 대해 설명되어 있습니다.

7.3.2 열 유체 회로 씻기

! 위험

설정값과 과열 보호 장치는 열 유체에 맞추지 않습니다
화재 사망 위험
 > 과열 보호 장치의 비활성화 값은 반드시 열 유체에 맞추어야 합니다. 과열 보호 장치의 비활성화 값을 열 유체 초점보다 25 K 밀도로 설정하십시오.
 > 세척 시 조정된 설정값은 사용 열 유체에 반드시 맞추어야 합니다.

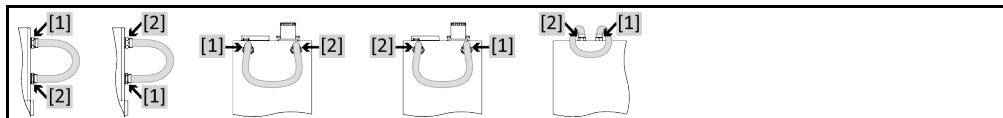
! 주의

사용되는 열 유체의 안전 데이터 시트의 미준수 위반
 > 눈, 피부, 기도에 상해를 끼칠 수 있는 위험이 있습니다.
 > 사용되는 열 유체의 안전 데이터 시트는 반드시 사용 전에 읽어야 하며, 내용을 따라야 합니다.
 > 지역 법규와 작동 설명서를 주의하시길 바랍니다.
 > 개인 보호 장비(예: 내온도성 보호 장갑, 보안경, 안전화)를 사용하시길 바랍니다.
 > 작업장에 있는 흙이나 오염으로 인해 미끄러질 수 있는 위험이 있습니다. 작업장을 청소하고, 열 유체와 보조제의 적절한 폐기에 유의하십시오. → 페이지 15, 섹션 «도구와 소모품의 전문적 폐기».

알아두기

열 유체 회로에서 다양한 유형의 열 유체가 섞이게 되면
물적 손상
 > 다양한 유형의 열 유체를 혼합하지 마시길 바랍니다(예를 들어, 미네랄 오일, 실리콘 오일, 합성 오일, 물 등).
 > 열 유체 종류를 다른 것으로 변경할 때 열 유체 회로를 반드시 세척해야 합니다. 열 유체 사이클에 기존에 사용된 열 유체의 잔여물이 남아 있으면 안 됩니다.

보기: 짧은 호스 연결



향후 사용 시(예컨대 약 100 °C 를 웃도는 온도에서 실리콘 오일 사용 시) 비등 지연을 방지하려면 온도 조절 장치 내부 부품을 건조해야 합니다.

정보

온도 조절 장치가 모두 연결부/배출관의 동일 결합을 구비하고 있지는 않습니다. 온도 조절 장치에 연결부/배출관이 없는 경우, 이 단계를 건너뛰십시오.

방법

- 온도 조절 장치를 비우십시오. → 페이지 41, 섹션 «외부에서 닫히는 장치 비우기».

정보

비운 이후에도 펌프실과 내부 라인에 열 유체의 잔여물이 아직 있을 수 있습니다. 그러므로 일정 시간 동안 밸브를 연 뒤에 온도 조절 장치를 세우시길 바랍니다.

- 배출 호스의 다른 끝에서 수집 용기의 충전 레벨을 체크하십시오. 열 유체의 전문적 폐기에 유의하십시오. → 페이지 15, 섹션 «도구와 소모품의 전문적 폐기».
- <액면계> [23]가 있는 온도 조절 장치: 널 스크루를 <배출관> [8]과 <잔여물 배출관> [10](있는 경우)에 끼우십시오.

정보

사용한 애플리케이션(외부 폐쇄)이 또한 오염된 경우, 단락 호스 부착 없이 다음 단계들을 밟으십시오. 이 경우 외부 폐쇄 애플리케이션을 온도 조절 장치에 연결해 두실 수 있습니다. 이로써 온도 조절 장치와 애플리케이션을 동시에 세척하실 수 있습니다.

- 온도 조절 장치에서 <순환 출구> [1]를 <순환 입구> [2]와 단락 호스로 연결하십시오.
- 시스템 충전(최소 충전 레벨)은 자신이 사용하기 원하는 열 유체로 하십시오. → 페이지 39, 섹션 «외부에서 닫히는 장치 충전과 환기».
- 시스템을 환기하십시오. → 페이지 39, 섹션 «외부에서 닫히는 장치 충전과 환기».
- 과열 보호설정값과 비활성화 값을 각각 사용 열 유체에 맞추십시오. → 페이지 35, 섹션 «설정값 조정» 및 → 페이지 37, 섹션 «과열 보호(ÜT) 켜기».
- 순환 을 시작하십시오. 세척 시간은 오염 정도에 의해 결정됩니다.
- 순환을 중단하십시오.
- 온도 조절 장치를 비우십시오. → 페이지 41, 섹션 «외부에서 닫히는 장치 비우기».
- 온도 조절 장치에서 <순환 출구> [1]를 <순환 입구> [2]와 단락 호스로 다시 연결하십시오.
- 방출된 열 유체가 계속 투명하도록, "충진", "환기", "순환 시작/중단" 그리고 "배출" 단계를 반복하십시오.
- 온도 조절 장치를 완전히 비운 후에 단락 호스를 제거하십시오.

정보

동시에 사용 애플리케이션(외부 폐쇄) 세척한 경우, 이 애플리케이션을 연결해 두십시오.

- 배출관을 장시간 열어 두시면, 온도 조절 장치에 남은 열 유체가 증발할 수 있습니다.
- 모든 밸브를 닫으십시오 → 페이지 41, 섹션 «밸브 닫기».
- 마지막으로 애플리케이션을 다시 연결하십시오. → 페이지 41, 섹션 «애플리케이션 분리/장착».
- 열 유체로 온도 조절 장치를 충전하십시오. → 페이지 39, 섹션 «외부에서 닫히는 장치 충전과 환기».
- 온도 조절 장치를 환기하십시오. → 페이지 39, 섹션 «외부에서 닫히는 장치 충전과 환기».
- 온도 조절 장치를 다시 정상 모드로 전환하십시오.

7.4 표면 청소

! 주의

극심한 열기/냉기 표면, 연결과 열 유체 사지 화상/동상

- 작동 모드에 따라 표면, 연결 장치, 온도 조절 열 유체가 극심한 열기나 냉기를 뿜 수 있습니다.
- 표면, 연결 장치, 열 유체와 직접적인 접촉을 피해야 합니다!
- 개인 보호 장비(예: 내온도성 보안경, 안전 장갑, 안전화)를 사용하시길 바랍니다.

알아두기

노출된 플러그 접점

액체 유입으로 인한 물적 손상

- 플러그 접점 보호로 공급된 마개가 사용되지 않았습니다.
- 젖은 천으로 표면을 청소합니다.

스테인리스 강 표면을 청소하기 위해서, 일반적인 스테인리스 세척제가 적합합니다. 온화 세정제로(젖었을 때만) 페인트된 표면을 부드럽게 청소합니다. 세제 및 보조제의 적절한 폐기에 유의하십시오. → 페이지 15, 섹션 «도구와 소모품의 전문적 폐기».

7.5 메커니컬 싯 확인

알아두기

베어링 링 육안 검사가 실시되지 않을 시

조여지지 않은 베어링 링으로 인한 온도 조절 장치의 물적 손상

- 베어링 링 매달 검사.
- 온도 조절 장치의 누설의 경우 작동을 중단하고, 고객 지원 센터에 연락합니다. → 페이지 55, 섹션 »연락 정보«.

밀봉이 완벽하게 되지 않았으므로, 증발되는 열 유체를 작동할 때에 기술적인 밀봉으로 방울이 생겨서 다루기 매우 어려울 것입니다. 필요한 경우, 이 액적은 제거되어야 합니다. → 페이지 45, 섹션 »기능과 시각적인 조사 간격«. 베어링 링의 밀봉은 눈으로 검사해야 하고, 밀봉이 안되었다면 열 조절 장치 밑에 열 유체가 모여 누출됩니다. 열 유체의 전문적 폐기에 유의하십시오. → 페이지 15, 섹션 »도구와 소모품의 전문적 폐기«.

7.6 플러그 접점

알아두기

노출된 플러그 접점

액체 유입으로 인한 물적 손상

- 플러그 접점 보호로 공급된 마개가 사용되지 않았습니다.
- 젖은 천으로 표면을 청소합니다.

모든 플러그 접점의 덮개를 포함합니다. 플러그인 접점이 필요하지 않다면, 덮개로 보호되도록 합니다.

7.7 오염 제거/수리

! 주의

수리하기 위해 오염이 제거되지 않은 온도 조절 장치 반환

온도 조절 장치 내외부의 위험 물질에 의한 인적 및 물적 손상

- 적절한 오염 제거를 실행하십시오.
- 오염 제거는 사용되는 재료의 유형과 분량에 따라 다릅니다.
- 관련된 안전 데이터 시트를 참조하십시오.
- www.huber-online.com 에서 준비된 반환에 대해서 알아보시길 바랍니다.

외부 직원이 온도 조절 장치/부대 용품과 접촉하기 전에 관리자가 책임지고 오염 제거 작업을 실시해야 합니다. 수리 또는 점검을 위해 온도 조절 장치/부대 용품을 보내기 전에 먼저 오염 제거 작업을 실시해야 합니다. 오염 제거 작업 실시에 대한 서면 메시지를 온도 조절 장치/부대 용품에 잘 보이도록 부착하십시오.

본 공정을 간단하게 만들 수 있는 양식을 준비했습니다. www.huber-online.com 에서 볼 수 있습니다.

8 가동 중단

8.1 안전 수칙과 원칙

 위험	<p>전원 연결/접속을 전기 기사가 하지 않고/거나 보호 접촉 기능(PE) 없는 전원 소켓 연결 감전사 위험</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 전원 연결/접속을 전기 기사에게 맡깁니다. ➢ 온도 조절 장치는 보호 접촉 기능(PE)을 갖춘 전원 소켓에만 연결합니다.
 위험	<p>손상된 전원 케이블/전원 커넥터 감전사 위험</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 온도 조절 장치를 가동하지 마세요. ➢ 온도 조절 장치를 전원 포트에서 분리합니다. ➢ 전기 기사에게 전원 케이블/전원 커넥터의 교체 및 확인을 맡깁니다. ➢ 3m 보다 긴 전원 케이블을 사용하지 마십시오.
 경고	<p>온도 조절 장치의 불안정한 설치에 따른 기울어질 위험 중상 및 물적 손상</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 온도 조절 장치의 불안정한 설치에 따른 기울어질 위험을 피합니다.
 주의	<p>사용되는 열 유체의 안전 데이터 시트의 미준수 위반</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 눈, 피부, 기도에 상해를 끼칠 수 있는 위험이 있습니다. ➢ 사용되는 열 유체의 안전 데이터 시트는 반드시 사용 전에 읽어야 하며, 내용을 따라야 합니다. ➢ 지역 법규와 작동 설명서를 주의하시길 바랍니다. ➢ 개인 보호 장비(예: 내온도성 보호 장갑, 보안경, 안전화)를 사용하시길 바랍니다. ➢ 작업장에 있는 흙이나 오염으로 인해 미끄러질 수 있는 위험이 있습니다. 작업장을 청소하고, 열 유체와 보조제의 적절한 폐기에 유의하십시오. → 페이지 15, 섹션 «도구와 소모품의 전문적 폐기».
 주의	<p>뜨겁거나 매우 차가운 열 유체 팔다리의 심한 화상/동상</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 비우기 전에, 열 유체가 실온(20 °C)으로 조절되도록 해야 합니다. ➢ 이 온도에서 열 유체가 지나치게 점성이 높아 배출이 어려운 경우: 점성이 배출에 충분해질 때까지 몇 분간 열 유체를 온도 조절합니다. 배출구가 열린 채로 열 유체를 온도 조절하면 절대 안 됩니다. ➢ 20 °C 가 넘는 온도에서 열 유체를 비우는 동안 화상의 위험이 있습니다. ➢ 배출되는 동안에 개인 보호 장구를 사용하십시오. ➢ 적절한 배출 호스와 수집 용기만을 사용하여 배출 작업을 실시하십시오. 호스와 용기는 열 유체 및 열 유체 온도와 맞아야 합니다.
정보	<p>모든 안전 수칙은 중요하고 작업 시 사용 설명서에 따라서 고려해야 합니다!</p>

8.2 비활성화

방법

- 온도 조절 장치를 끄십시오.
- 전원 연결 장치에서 온도 조절 장치를 분리하십시오.

8.3 온도 조절 장치 비우기

방법

- 온도 조절 장치를 비우십시오. → 페이지 이하 39, 섹션 «충전, 환기 그리고 배출».

8.4 냉각수 배출

정보 본 섹션에 수랭 온도 조절 장치 시용 시에만 유의합니다.

8.4.1 배출 과정

주의

압력을 받고 있는 냉각수 커넥터
부상 위험

- 개인 보호 장비(예컨대 보안경)를 착용하십시오.
- 조심스럽게 냉각수 커넥터를 여십시오. 천천히 돌려 열고(1 - 2 플랭크) 천천히 냉각수를 배출합니다.

알아두기

건물 측 차단 밸브가 닫히지 않았습니다
공간 범람에 따른 물적 손상

- 냉각수 왕복관에서 건물 측 차단 밸브를 닫으십시오.
- 수집 용기를 각각 냉각수 공급 장치 [13], [14] 및 [15](있는 경우) 밑에 두십시오.

방법

- 냉각수 회로를 비울 때 설명한 대로 진행하십시오.
→ 시작 페이지 48, 섹션 «냉각수 회로 비우기»에서 확인하십시오.
→ 시작 페이지 48, 섹션 «냉각수 공급 장치 분리»에서 확인하십시오.

8.5 수집 용기 설치

방법

- 호스를 수집 용기에서 제거하십시오.
- 열 유체의 전문적 폐기에 유의하십시오. → 페이지 15, 섹션 »도구와 소모품의 전문적 폐기«.
- 호스를 >오버플로우< [12]에서 분리하십시오.

8.6 외부 애플리케이터 설치 해제

방법

- 외부 애플리케이터를 온도 조절 장치에서 분리하십시오.

8.7 널 스크루 장착

방법

- 배출관의 널 스크루가 제대로 끼워져 있고 손으로 조여져 있는지 확인하십시오.

8.8 받침대(있는 경우) 조이기/비활성화

받침대는 온도 조절 장치의 포장에 앞서 조이고/비활성화시켜야 합니다.

방법

- 롤러에 있는 잠금 브레이크(있는 경우)가 활성화되었는지 체크하십시오.
- 받침대를 앞으로 돌리십시오.
- 스탠드 모델: 롤러에 있는 잠금 브레이크(있는 경우)가 비활성화되었는지 체크하십시오.

8.9 포장

기존의 포장재를 항상 사용하시길 바랍니다! → 페이지 23, 섹션 «언패킹».

8.10 운반

알아두기

온도 조절 장치는 누워서 운반합니다

압축기 물적 손상

- 온도 조절 장치는 세워서만 운반합니다.

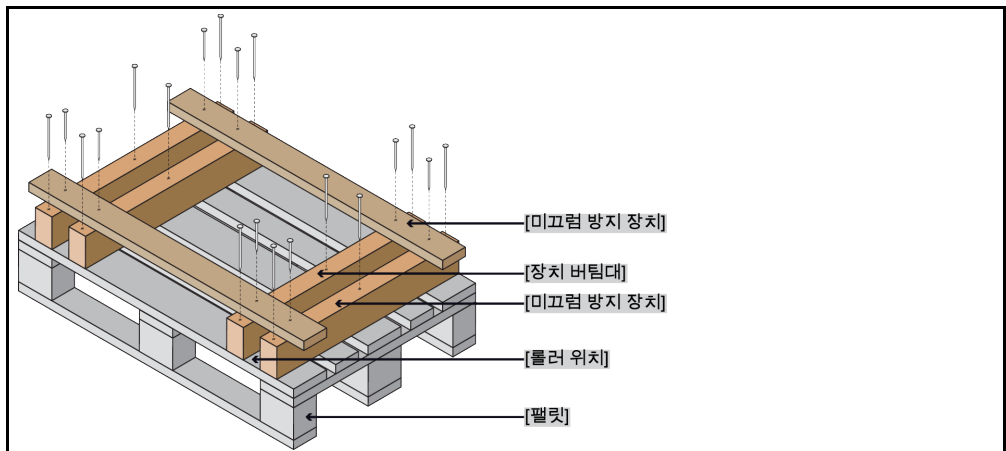
알아두기

온도 조절 장치의 부적절한 운반

물적 손상

- 트럭에서 롤러나 받침대 위에 두고 운반하면 안 됩니다.
- 온도 조절 장치의 물적 손상을 피하기 위해서 섹션에 있는 모든 필요 조건을 고려하시길 바랍니다.

바닥 설치 장치용
각재 포함 팰릿



사용 가능하다면 운반을 위하여 온도 조절 장치 상단의 아일릿을 사용합니다. 온도 조절 장치를 보조 기기 없이 단독으로 운반해서는 안 됩니다.

- 운반을 할 때 항상 기존의 포장을 사용합니다.
- 포장 위에 화살표로 유효한 운반 위치를 표시합니다.
- 온도 조절 장치는 화물 운반대에서 반드시 세워 놓은 채로 운반해야 합니다!
- 운반하는 동안에 부품이 손상되지 않도록 보호합니다!
- 운반하는 동안 롤러와 받침대를 보호하기 위해 온도 조절 장치 밑에 각재를 놓습니다.
- 벨트/래싱으로 무게에 따라 보호합니다.
- 이에 더불어(모델에 따라) 포일, 판지 그리고 스트래핑으로 안전하게 합니다.

8.11 폐기

관리자는 장치의 전문적 폐기 시 국내 및 지역 규정을 준수해야 합니다

⚠ 주의

냉각제 회로를 무절제하거나 부적절하게 여는 행위
부상 위험과 환경 피해

- 냉각제 회로 작업 또는 냉각제 폐기는 오직 허가받은 냉각 및 공기 조절 전문 업체에만 맡깁니다.
- 무조건 유의할 사항: → 페이지 18, 섹션 «불화계 온실 가스/냉매를 갖춘 온도 조절 장치».

알아두기

비전문적 폐기

환경 피해

- 유출/누출 유체는 즉시 전문적으로 폐기해야 합니다. → 페이지 15, 섹션 «도구와 소모품의 전문적 폐기».
- 환경 피해를 방지하기 위해 "노후" 온도 조절 장치는 허가받은 폐기 업체(예: 냉각 공기 조절 전문 업체)에만 폐기를 맡기십시오.
- 무조건 유의할 사항: → 페이지 18, 섹션 «불화계 온실 가스/냉매를 갖춘 온도 조절 장치».

Huber 온도 조절 장치와 Huber 부대 용품은 높은 품질의 재활용 가능한 재료로 만들어집니다. 예시: 스테인리스 강 1.4301/1.4401(V2A), 구리, 니켈, 폴루오로일래스토머, 페르부난, 니트릴부타디엔 고무, 세라믹, 탄소, 알 옥사이드, 청동, 황동, 니켈로 덮인 황동 그리고 실버 솔져. 온도 조절 장치와 부대 용품의 전문적 재활용을 통해서 이러한 재료 생산 시 CO₂ 방출을 줄이는 데 도움을 제공할 수 있습니다. 폐기할 때, 지역 법률과 규정을 확인하시길 바랍니다.

8.12 연락 정보

정보

온도 조절 장치 재설정 전에 공급자 및 지역 전문 딜러와 연락하시기 바랍니다. 연락 정보는 당사 홈페이지 www.huber-online.com 의 "연락처" 항목에서 확인하실 수 있습니다. 이용 가능한 귀하 온도 조절 장치의 일련 번호를 가지고 계시길 바랍니다. 일련 번호는 온도 조절 장치의 라벨에 있습니다.

8.12.1 전화번호: 고객 지원

귀국이 다음 목록에 수록되어 있지 않은 경우: 담당 서비스 담당자는 당사 홈페이지 www.huber-online.com 의 "연락처" 항목에서 확인하실 수 있습니다.

- Huber Deutschland: +49 781 9603 244
- Huber China: +86 (20) 89001381
- Huber India: +91 80 2364 7966
- Huber Ireland: +44 1773 82 3369
- Huber Italia: +39 0331 181493
- Huber Swiss: +41 (0) 41 854 10 10
- Huber UK: +44 1773 82 3369
- Huber USA: +1 800 726 4877 | +1 919 674 4266

8.12.2 전화번호: 판매

전화번호: +49-781-9603-123

8.12.3 이메일 주소: 고객 지원

이메일: support@huber-online.com

8.13 통관 증명서

이 인증서는 무조건 온도 조절 장치에 동봉해야 합니다. → 페이지 51, 섹션 «오염 제거/수리».

9 부록

Inspired by **temperature** designed for you

Peter Huber Kältemaschinenbau SE
Werner-von-Siemens-Str. 1
77656 Offenburg / Germany

Telefon +49 (0)781 9603-0
Telefax +49 (0)781 57211

info@huber-online.com
www.huber-online.com

Technischer Service: +49 (0)781 9603-244

-125 °C ... +425 °C

huber